

**REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA**

HOSPITAL SAN ANTONIO
DE PADUA

SIMITI / BOLIVAR
2023

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

HOSPITALIZACIÓN

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	SK600II	
SERIE	SK00304954	
N. INV:		
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	AISLADOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

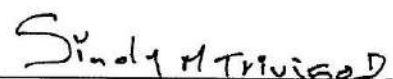RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR SALA HOSPITALIZACION MUJERES 1
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	D122EGBL008	
N. INV:	0048	
CUIDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	


Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

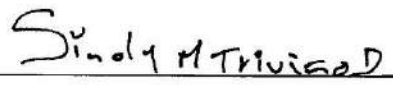RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR HOSPITALIZACION SALA 4
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEFUSION VP1	
SERIE	SK00306336	
N. INV:	0210	
CUIDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

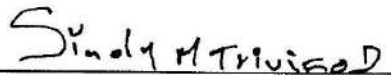
Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR URGENCIAS
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	D122EGBL007	
N. INV:	0027	
CUIDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se encontró en sala de Urgencias – rehidratación

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR HOSPITALIZACION H2
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	D122EGAF071	
N. INV:	0006	
CUIDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferraz
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-03035136	
N. INV:	211	SERVICIO: ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar baterías e indicador de carga	✓
Verificar circuito de descarga interna	✓
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	✓
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	✓
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	✓
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0158	
N. INV:	215	HOSPITALIZACION SALA 4
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560042-M22609760021	
N. INV:	347	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☐

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	XHZ-90L	
SERIE	A46BC0003009	
N. INV:	420	SERVICIO SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA 2
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo, giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierman
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	XHZ-90L	
SERIE	A46BC0003013	
N. INV:	419	SERVICIO SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA 2
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo, giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	XHZ-90L	
SERIE	46AHZG05001	
N. INV:		SERVICIO SALA HOSPITALIZACION MUJERES 1
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo, giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD00132	
N. INV:	233	REMISIONES
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

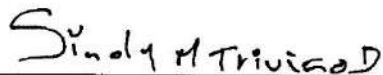RECIBE: 
Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0149	
N. INV:	220	HOSPITALIZACION SALA 1
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0157	
N. INV:	222	HOSPITALIZACION SALA 1
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	MS32997	DE PADUA
SERIE	S2SNF0164	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	208	HOSPITALIZACION SALA 2
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0159	
N. INV:	200	
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	HOSPITALIZACION SALA 4

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0163	
N. INV:	217	HOSPITALIZACION SALA 2
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	DRAGER	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0157	
N. INV:	198	HOSPITALIZACION SALA 3
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0162	
N. INV:	206	HOSPITALIZACION SALA 3
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE -120	
SERIE	J3300QD02782	
N. INV:	195	SALA DE HOSPITALIZACION HOMBRES 2
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

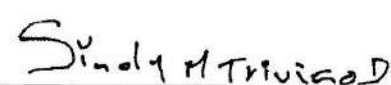RECIBE: 
Sindy M. Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	ADVANCED	
MODELO	PM200M	
SERIE	Q068A027646	
N. INV:	257	SALA DE HOSPITALIZACION HOMBRES 3
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE -120	
SERIE	J3300QD02809	
N. INV:	225	SALA DE HOSPITALIZACION MUJERES 2
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	DEVILBISS	
MODELO	PULMOAIDE - 5650D	
SERIE	D7001383	SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRICA
N. INV:	193	
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza FERNANDEZ
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	ADVANCED	HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MODELO	PM200M	
SERIE	Q068A027531	
N. INV:	264	SALA DE HOSPITALIZACION MUJERES 2
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se encontró sin brazaletes de un vía.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE -120	
SERIE	J3000QD00124	
N. INV:	246	SALA DE HOSPITALIZACION MUJERES 3
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD00119	
N. INV:	234	SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STU
 RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD0099	
N. INV:	196	HOSPITALIZACION MUJERES 2
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Presenta daño en tapa, se encontró en SALA HOSPITALIZACIÓN MUJERES 2

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	THOMAS	
MODELO	MEDI-PUMP	
SERIE	61600012532	
N. INV:	.0010	SERVICIO ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	PEDESTAL	
SERIE	200605111195	
N. INV:	.0277	SERVICIO: ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION
CIUDAD Y FECHA:	1 3 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trujillo

**REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA**

ESTERILIZACION

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	PAFFOR- SM	
MODELO	VAC-150L	
SERIE	.08-10-2003-288	SERVICIO: ESTERILIZACION
N. INV:	008	
CIUDAD Y FECHA:	13 SEP. 2023	


Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	
Revisar estado del empaque de la puerta	
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada(válvula múltiple, tuberías, etc.)	
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	
Verificar estado de temporizador	
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	
Verificar estado de válvula de seguridad	
Verificar el funcionamiento del equipo	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DAÑO EN PUERTA, SE REALIZA TRASLADO A NUESTRO LABORATORIO.

REALIZADO POR:

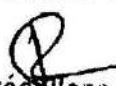
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	PAFFOR	
MODELO	STEAM MEDICAL	
SERIE	092418-025	SERVICIO: ESTERILIZACION
N. INV:	007	
CIUDAD Y FECHA:	1 3 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar estado del empaque de la puerta	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada(válvula múltiple, tuberías, etc.)	✓
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	✓
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	✓
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	✓
Verificar estado de temporizador	✓
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	✓
Verificar estado de válvula de seguridad	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ ☐

Funcional
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

José Fidel Ortiz

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

ODONTOLOGIA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UNIDAD ODONTOLOGICA # 1	SEÑOR(ES):
MARCA	KROMADENT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	FUTURA- SEMI ELECTRICA	
SERIE	06678	
N. INV:	0133	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	4 SEP. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar fugas de manguera de agua y de aire	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de presion de agua	✓
Revisar presion de trabajo para pieza de alta y pieza de baja (Max 35 PSI)	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar estado de manómetro, cambiar si es necesario	✓
Verificar funcionamiento electrico o neumatico de silla y su espaldar	✓
Verificar estado de eyector, jeringa triple, reostato, pieza de alta y baja, holders, negatoscopio	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico).	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UNIDAD ODONTOLOGICA # 2	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	KROMADENT	
MODELO	FUTURA - SEMI ELECTRICA	
SERIE	6679	
N. INV:	138	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	1 4 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	/
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	/
Revisar fugas de manguera de agua y de aire	/
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	/
Revisar sistema de presion de agua	/
Revisar presion de trabajo para pieza de alta y pieza de baja (Max 35 PSI)	/
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	/
Verificar estado de manómetro, cambiar si es necesario	/
Verificar funcionamiento electrico o neumatico de silla y su espaldar	✓
Verificar estado de eyector, jeringa triple, reostato, pieza de alta y baja, holders, negatoscopio	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico).	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AMALGAMADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	MILLENIUM	
MODELO	2000	
SERIE	AML15-26350	
N. INV:	.0145	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	/
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	/
Verificar dosificación.	/
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo.	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BONART	
MODELO	ART MAVERICK	
SERIE	DC-51109	
N. INV:	.0135	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	/
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	/
Verificar pedal	/
Verificar estado de filtro de agua	/
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	/
Verificar irrigador bucal	/
Verificar funcionamiento electrico	/
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	SEÑOR(ES):
MARCA	DBA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	D5	
SERIE	D7202099213	
N. INV:	.0144	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	☒
Verificar pedal	☒
Verificar estado de filtro de agua	☒
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	☒
Verificar irrigador bucal	☒
Verificar funcionamiento electrico	☒
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BONART	
MODELO	ART MAVERICK	
SERIE	DC-51108	
N. INV:	.0139	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDADY FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	☒
Verificar pedal	☒
Verificar estado de filtro de agua	☒
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	☒
Verificar irrigador bucal	☒
Verificar funcionamiento electrico	☒
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DENTOMAT	
MODELO	3000-S	
SERIE	1033	
N. INV:	.0134	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	/
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	/
Revisar estado del empaque de la puerta	/
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	/
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada (válvula múltiple, tuberías, etc.)	/
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	/
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	/
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	/
Verificar estado de temporizador	/
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	/
Verificar estado de válvula de seguridad	/
Verificar el funcionamiento del equipo	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOCURADO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DBA	
MODELO	LED D	
SERIE	L1830602C	
N. INV:	.0140	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Verificar la fotopolimerizacion	
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	
Verificar estado de filtro y fibra optica	
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	
Revisar sistema de carga de bateria	
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimientos
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

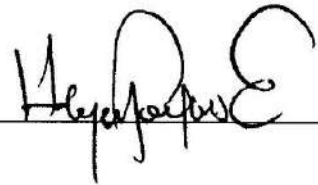

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X PERIAPICAL	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	FIAD	
MODELO	ELITY 70	
SERIE	70M1-1275	
N. INV:	.0136	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	☒
Verificar conector de tubo de rayos X	☒
Verificar estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos	☒
Verificar estado de perillas y lámpara indicadora	☒
Lubricar articulación de brazo portatubo, si es necesario	☒
Verificar funcionamiento del compensador de voltaje de línea si aplica.	☒
Verificar corrientes del tubo y tiempo de exposición	☒
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fierman
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	APPLEDENTAL		
MODELO	TUP RED		
SERIE	H180523001Z-1		
N. INV:		SERVICIO:	ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	J 4 SEP. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente	✓
Inspeccionar turbina	✓
Verificar canales de libricacion, lubricar	✓
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: *Elber Andrés Plaza Fernández*
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *Marco Aurelio Rueda Santana*

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	NSK		
MODELO	DYNALED M600LG B2		
SERIE	0BB201137		
N. INV:		SERVICIO:	ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente	
Inspeccionar turbina	
Verificar canales de lubricacion, lubricar	
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☐
☐


Funcional

Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Equipo no instalado, sigue nueva.

REALIZADO POR:

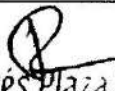
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

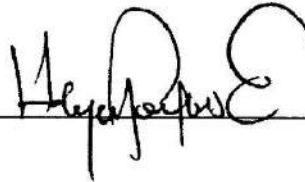

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	APPLEDENTAL		
MODELO	L-GREEN		
SERIE	AM170816001-A		
N. INV:		SERVICIO:	ODONTOLOGIA
CUIDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente	
Inspeccionar cabeza de contra angulo, micromotor y punta recta.	
Verificar canales de libricacion, lubricar	
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se recomienda dar de baja, presenta fallas internas de material, no permite reparación, se recomienda dar de baja.

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	APPLEDENTAL		
MODELO	L-GREEN		
SERIE	AM150124013-A / CA180124004-A	SERVICIO:	ODONTOLOGIA
N. INV:			
CUIDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral	✓
Inspeccionar externamente	✓
Inspeccionar cabeza de contra angulo, micromotor y punta recta.	✓
Verificar canales de lubricacion, lubricar	✓
Verificar el funcionamiento y la presion de trabajo max 35 PSI	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: *Elber Andrés Plaza Fernández*
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *Marco Aurelio Rueda Santana*

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	COMPRESOR ODONTOLOGICO	E.S.E. HOSPITAL
MARCA	SCHULZ - 4HP	SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	MSV 12	SIMITI - BOLIVAR
SERIE	354354	SERVICIO:
N. INV:		ODONTOLOGIA
CUIDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar cables de alimentación y protección eléctrica	✓
Inspeccionar uniones y empaques	✓
Revisar valvula de seguridad	✓
Revisar Presostato y su calibracion	✓
Verificacion sistema electrico	✓
Verificar drenaje de tanque de presión y registro de salida	✓
Verificar presión (35 a 40 PSI) y filtro de salida de presión, drenar si es necesario	✓
Verificar arranque y paro del compresor	✓
Verificar consumo de corriente eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Valencia

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DATOS DE BAJA

LABORATORIO CLINICO

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROSCOPIO	SEÑOR(ES):
MARCA	LABOMED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	LX 400	
SERIE	140665600	
N. INV:	.0102	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Limpiar, lubricar y ajustar el sistema porta lamina	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROSCOPIO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	LABOMED	
MODELO	LX 400	
SERIE	140665572	
N. INV:	100	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa del equipo	
Inspeccionar el equipo en forma externa	
Efectuar limpieza integral interna del equipo	
Limpiar sistema optico	
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	
Verificar la operación de todos los indicadores	
Limpiar, lubricar y ajustar el sistema porta lamina	
Realizar Prueba de seguridad electrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☐ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Se encuentra fuera de servicio, sin carro de pruebas, se recomienda dar de baja.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

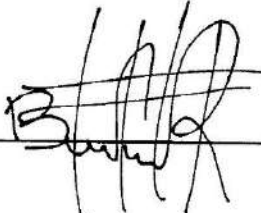

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BAÑO SEROLOGICO	SEÑOR(ES):
MARCA	MEMMERT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	0	
SERIE	DIN12876-3-K1	
N. INV:	.0086	
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	SERVICIO:
		LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	/
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	/
Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos	/
Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes)	/
Verificar control automático de temperatura	/
Verificar temperatura con termómetro de mmHg	/
Inspeccionar lámparas de señalización	/
Comprobar tiempo de alcance de temperatura	/
Realizar Prueba de seguridad electrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	SEÑOR(ES):
MARCA	BOECO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	OS20	
SERIE	1407-0206	
N. INV:	.0085	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	☒
Verificar perillas de control y señalizaciones	☒
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	☒
Verificar medidor de tiempo	☒
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

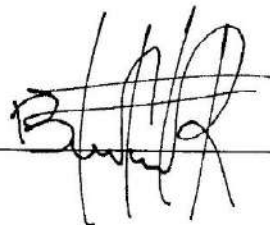RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	AGITADOR HEMATOLOGICO BASCULANTE	SEÑOR(ES):
MARCA	INDULAB	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	2007	
SERIE		
N. INV:	0424	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	14 SEP. 2023	LABORATORIOCLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

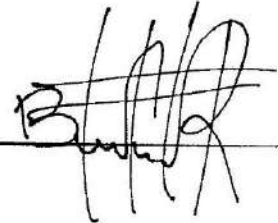RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	SEÑOR(ES):
MARCA	OPTIMA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	DSR-2100P	
SERIE	13020096	
N. INV:	.0090	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	/
Efectuar limpieza integral interna del equipo	/
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	/
Verificar perillas de control y señalizaciones	/
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	/
Verificar medidor de tiempo	/
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	/
Realizar Prueba de seguridad electrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

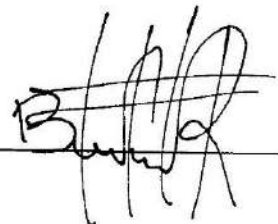RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROCENTRIFUGA	SEÑOR(ES):
MARCA	BOECO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	HC240	
SERIE	.0000120	
N. INV:	.0092	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	J 4 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	/
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	/
Verificar perillas de control y señalizaciones	/
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	/
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	/
Verificar el balance del plato con carga	/
Verificar medidor de tiempo	/
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	/
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	/
Realizar Prueba de seguridad electrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROCENTRIFUGA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CLAY ADAMS	
MODELO	COMPACT II	
SERIE	5160017	
N. INV:	0087	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDADY FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	✓
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CENTRIFUGA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CLAY ADAMS	
MODELO	COMPACT II	
SERIE	5160019	
N. INV:	.0103	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	✓
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

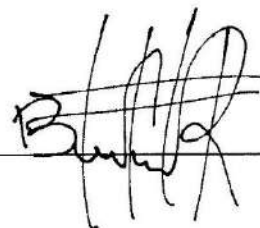

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SEROFUGA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CLAY ADAMS	
MODELO	2002	
SERIE	5030027	
N. INV:	.0088	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	
Verificar perillas de control y señalizaciones	
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	
Verificar el balance del plato con carga	
Verificar medidor de tiempo	
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	
Realizar Prueba de seguridad electrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Equipo fuera de servicio, plato de carga partido, en proceso de mantenimiento correctivo.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	HORNO DE CALOR SECO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DKASA	
MODELO		
SERIE	KWS1523J-H12	
N. INV:	0099	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.)	/
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador)	/
Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores	/
Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del	/
Verificar protecciones y alarmas (sobretensión, no circulación del aire, etc.)	/
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

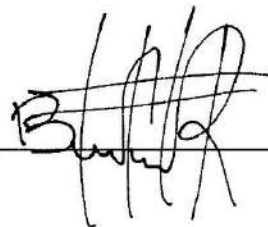

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	HORNO DE CALOR SECO	SEÑOR(ES):
MARCA	MEMMERT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	30-705	
SERIE	60529	
N. INV:	0105	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	
Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.)	
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador)	
Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores	
Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del	
Verificar protecciones y alarmas (sobretensión, no circulación del aire, etc.)	
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☐ Funcional

☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Equipo fuera de servicio por daño en perilla de regulación.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

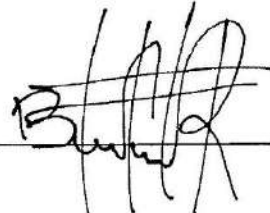

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	I15	
SERIE	DM-005549	
N. INV:	.0094	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR QUIMICA SANGUINEA	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BIOSYSTEMS		
MODELO	BTS-360		
SERIE	801757982	SERVICIO:	Laboratorio Clínico
N. INV:	.0084		
FECHA:	14 SEP. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesar	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR: *Elber Andrés Plaza Ferrandiz*
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *[Signature]*

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR QUIMICA SANGUINEA	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	MINDRAY		
MODELO	BS-240PRO		
SERIE	BC7-26002166		
N. INV:	0421	SERVICIO:	Laboratorio Clinico
FECHA:	14 SEP. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesar	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR: **Ing. Mantenimientos**
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: _____

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE HEMATOLOGIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI / SUR DE BOLIVAR
MODELO	BC-5390	
SERIE	TM-23000574	
N. INV:	0372	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	4 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA MICRO ELISA	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	STAT FAX-2200	
MODELO	AWARENESS TECHNOLOGY INC	
SERIE	18956	
N. INV:	.0097	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar la estabilidad de la lámpara.	✓
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	✓
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	✓
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	✓
Verificación de valibración por filtros.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LECTOR DE MICROPLACAS	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	MR-96A	
SERIE	83108229	
N. INV:	.0095	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar la estabilidad de la lámpara.	✓
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	✓
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	✓
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	✓
Verificación de valibración por filtros.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	MW-12A	
SERIE	77105152	
N. INV:	.0098	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Desensamblar y limpiar los conductos y conectores.	✓
Verificar la integridad de los componentes mecánicos.	✓
Confirmar la integridad del conector eléctrico y el cable de interconexión	✓
Verificar calibración del sistema.	✓
Lubricación general.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UROMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	SD STANDARD DIAGNOSTIC INC	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	UROMETER 120	
SERIE	120160428023	
N. INV:	.0101	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Verificar la estabilidad de la lámpara.	/
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	/
Verificación de calibración.	/
Realizar Prueba de seguridad electrica y funcionamiento.	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DETECTOR DE INMUNOFLUORECENCIA	SEÑOR(ES):
MARCA	WONDFO	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	FS-113	
SERIE	FS1132111211184	
N. INV:	0284	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	☒
Revisar impresora	☒
Revisar mangueras y drenaje	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



**REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DATOS DE BAJA**

SALA DE PARTOS

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	M18506950001	
N. INV:	0028	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	14 SEP, 2023	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	EDAN	
MODELO	IM70	
SERIE	M6305560024	
N. INV:	0036	SERVICIO: SALA DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy H Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	ADVANCED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		
SERIE	PM200M	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	14 SEP. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	/
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	/
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	/
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	/
Verificar fugas y lecturas de presión	/
Verificar la lectura de temperatura	/
Verificar lectura de pulso y oximetría	/
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	/
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Se requiere cambio de Sensor de Oximetría.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

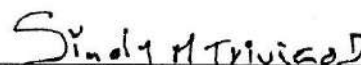

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE 100	
SERIE	J3000QD00116	SERVICIO: ATENCION NEONATOS
N. INV:	0232	
CIUDADY FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES):
MARCA	NINGBO DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	HKN9010	
SERIE	22130504006	
N. INV:	.0041	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	14 SEP. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	DAVID	
MODELO	HKN-9010	
SERIE	22AHZD01013	
N. INV:	.0033	SERVICIO: ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	14 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Requiere cambio de acrílico de base.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

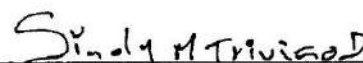

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	SMAF	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	SXT-5A	
SERIE		
N. INV:	0016	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	14 SEP. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	
Inspeccionar valvulas unidireccionales	
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	
Revisar sellado de nivel de liquido	
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	
Verificar flujo maximo (lts/min)	
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	
Realizar Prueba de seguridad electrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Equipo requiere kit de mangueras, filtro hidrofobico y boquilla, equipo fuera de servicio.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

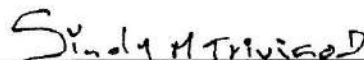

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-7B000191	
N. INV:	.0037	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	ATENCION DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar baterías e indicador de carga	✓
Verificar circuito de descarga interna	✓
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	✓
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	✓
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	✓
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	Z B600193	
N. INV:	.0035	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	14 SEP. 2023	ATENCION DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa del equipo	
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	
Efectuar limpieza integral interna del equipo	
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	
Revisar baterías e indicador de carga	
Verificar circuito de descarga interna	
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Requiere cable de poder, equipo fuera de servicio, no se puede encender.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STU
 RH - 201609 - 481

RECIBE:

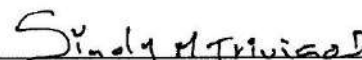

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA DE TRANSPORTE	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	TI-2000	
SERIE	36AHZ001013	
N. INV:	.0032	SERVICIO: ATENCION NEONATOS
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna	☒
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	☒
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	☒
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	☒
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	☒
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	☒
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	☒
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	☒
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	☒
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Requiere cambio de visagras de tapa.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

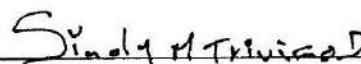

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA CERRADA	SEÑOR(ES):
MARCA	ADVANCED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	YP-2060	
SERIE	13AHZE02001	
N. INV:	.0031	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	1 5 SEP. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna	☒
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	☒
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	☒
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	☒
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	☒
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	☒
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	☒
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	☒
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	☒
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza FERNÁNDEZ
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

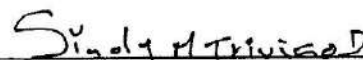

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BASCULA PESA BEBES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DETECTO	
MODELO	ACS-20B-YE	
SERIE		
N. INV:	0044	SERVICIO: ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	1 5 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa del equipo	
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	
Efectuar limpieza integral interna del equipo	
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	
Lubricar el sistema mecánico	
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	
Verificar el funcionamiento	


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

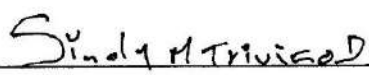

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180417152635	
N. INV:	0030	SERVICIO: SALA DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	
Efectuar chequeo de fugas.	
Verificar lecturas en el manometro.	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767	
SERIE	180417115985	
N. INV:	0238	SERVICIO: ATENCIÓN DE PARTOS
CIUDADY FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral	
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	
Efectuar chequeo de fugas.	
Verificar lecturas en el manómetro.	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Equipo descalibrado, se recomienda su cambio.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

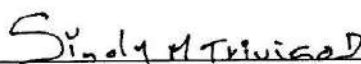

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX	
SERIE	560042-M22201680030	
N. INV:	0349	SERVICIO PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGAF074	
N. INV:	0034	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CUIDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral del equipo	
Verificar cable de poder	
Verificar seguros de la puerta	
Verificar elementos de sujecion al atril	
Verificar funcionamiento del motor	
Verificar sistemas electricos y mecanicos	
Verificar funcionamiento general del equipo.	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	D12200	
SERIE	D122EGBL009	
N. INV:	0026	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M. Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGAF073	
N. INV:	0183	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CUIDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy R Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI ATENCION DE PARTOS
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGF075	
N. INV:	0005	
CUIDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	XHZ-90L	
SERIE:	A46BC0003004	
N. INV:	0418	ATENCION NEONATOS
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	XHZ-90L	
SERIE:	A46BC03013	ATENCION NEONATOS
N. INV:	0419	
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	XHZ-90L	
SERIE:	46AH2605001	
N. INV:		ATENCION NEONATOS
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:


REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	XHZ-90L	
SERIE:	A46BC0003009	
N. INV:	0420	ATENCION NEONATOS
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED 600	
SERIE	39-85000269	
N. INV:		SERVICIO SALA DE LEGRADOS
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	
Efectuar limpieza integral interna del equipo	
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	
Lubricar partes móviles	
Verificar operatividad de sistema mecánico	
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Requiere nivelación de base de techo.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CUELLO DE CISNE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	SM	
MODELO	SM	
SERIE		SERVICIO: ATENCION DE PARTOS
N. INV:		
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

--

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trivedi

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAQUINA DE ANESTESIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	WATO EX - 65	
SERIE	KT-84001537	
N. INV:	0046	SERVICIO SALA DE LEGRADOS
CIUDAD Y FECHA:	15 SEP. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	
Inspeccionar partes mecánicas; identificar daños y partes faltantes	

Sistema de gases

Verificar la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared)	
Revisar el estado y lectura de los medidores de presión;	
Revisar el funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvula de inspiración y espiración)	
Verificar presiones en los reguladores	
Inspeccionar la tubería y adaptadores por fuga de gas	
Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión	
Verificar la ausencia de fugas en el sistema de baja presión,	
Inspeccionar todos los accesorios empaques O-ring, diafragmas y otro empaques	
Efectuar limpieza de flujómetros, revisar la calibración de estos	
Revisar físicamente los vaporizadores, verificar funcionamiento	

Canister

Drenar y limpiar el absorbedor (canister)	
Verificar el estado físico del canister	
Revisar empaques del canister, cambiar si es necesario	
Revisar físicamente las válvulas check de inhalación y exhalación	
Revisar y calibrar el medidor de presión	
Revisar la válvula APL, si está operando	
Haga la prueba de operación con toda la tubería conectada para verificar la expulsión del gas	
Verificar la operación y control de flujo de las válvulas de flujo de O ₂ y N ₂ O	
Verificar el funcionamiento de todas las alarmas	

Ventilador de anestesia

Revisar el sistema de accionamiento del fuelle y su correcto funcionamiento	
Verificar el funcionamiento del ventilador	
Inspeccionar los componentes eléctricos	
Efectuar pruebas de seguridad eléctrica	
Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se traslada a almacén.

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	THOMAS	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	MEDI-PUMP	
SERIE	061600012526	
N. INV:	0180	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	15 SEP. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:

