


4.3 Colocar y nivelar la báscula

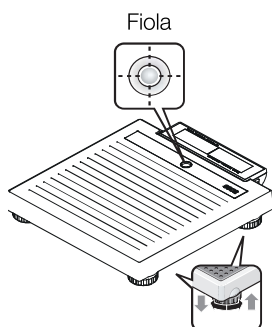

1. Coloque la báscula sobre una base firme.
2. Nivele la báscula girando los tornillos niveladores.
La burbuja de aire de la fiola debe encontrarse exactamente en el centro del círculo.
3. Asegúrese de que la báscula solo esté en contacto con el suelo a través de las patas. La báscula no puede disponerse de ningún otro modo.


NOTA:

La nivelación del suelo de la báscula se ha de comprobar y, en su caso, corregir, cada vez que se cambie el emplazamiento.

5. MANEJO

5.1 Pesaje

Inicio del proceso de pesaje

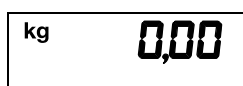


1. Asegúrese de que sobre la báscula no haya ningún peso.
2. Pulse la tecla **start**.
En el visor aparece **SECA**, después se muestran brevemente todos los elementos del visor.
La báscula está operativa cuando en el visor aparece **0,00**.
Si la báscula está funcionando con una fuente de alimentación, en el visor aparece el símbolo ψ .
3. Si es necesario, conmute la indicación de peso a (véase "Conmutar la unidad de peso" en la página 12).
4. Suba a la báscula y permanezca de pie tranquilamente.

NOTA:

En caso de pesos superiores a 1,5 kg o 3,3 lbs, la función HOLD se activa de forma automática. El indicador parpadea hasta haberse medido un peso estable. A continuación, el indicador se congela hasta el próximo pesaje. En el visor aparece Δ **HOLD**.

5. Lea el resultado de la medición.

Pesar bebés/niños pequeños (2 en 1)

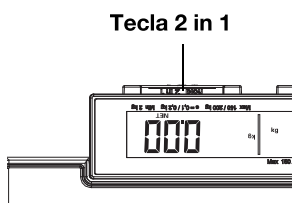

Con ayuda de la función **2 in 1** puede calcular el peso de bebés y niños pequeños. Para ello, durante el pesaje, el niño permanece en brazos de un adulto. Proceda de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que sobre la báscula no haya ningún peso.
2. Pida al adulto que se coloque sobre la báscula.
3. Lea el resultado de la medición.
4. Mantenga pulsada la tecla **2 in 1** hasta que en el visor aparezca la indicación "NET".

Se memoriza el peso.


0,00 aparece en el visor.

¡ATENCIÓN!

Medición errónea debido a un peso inicial diferente



Cuando el pesaje del niño se realiza con un peso inicial diferente puede que el peso del niño no se calcule correctamente.

- Asegúrese de que el pesaje del niño siempre tenga lugar con el adulto con el que se calculó el peso inicial.
- Asegúrese de que el peso del adulto no varía, por ejemplo por ponerse ropa.

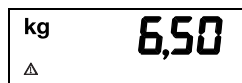

5. Pida al adulto que suba a la báscula con el niño.
Se indica el peso del niño.
Se muestra el símbolo $\triangle$, así como los mensajes "HOLD" y "NET".
6. Pida al adulto que se baje de la báscula con el niño.
7. Para desactivar la función **2 in 1**, presione la tecla **2 in 1** hasta que desaparezcan tanto el símbolo $\triangle$ como los mensajes "HOLD" y "NET" o desconecte la báscula.

Conmutar la unidad de peso

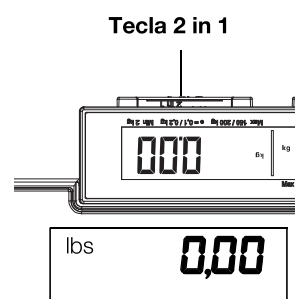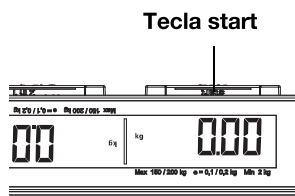

La indicación del peso puede conmutarse entre kilogramos (kg) y libras (lbs).


1. Encienda la báscula con la tecla **start**.
Se muestra la unidad de peso actual (aquí: kg)

2. Mantenga pulsada la tecla **2 in 1** durante 3 segundos aprox.

Se ha conmutado la unidad (aquí: lbs).

3. Para conmutar la unidad de nuevo, mantenga pulsada la tecla **2 in 1** durante 3 segundos aprox.

Desconectar la báscula

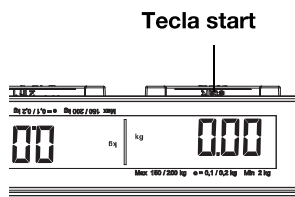

- Pulse la tecla **start**.

NOTA:

La báscula se desconecta automáticamente al poco rato si no se coloca ningún peso sobre ella.

6. PREPARACIÓN HIGIÉNICA



¡ADVERTENCIA!

Electrocución

El aparato no queda sin corriente cuando se pulsa la tecla CON/DES y se apaga el visor. En caso de aplicar líquidos en el aparato se puede producir una descarga eléctrica.

- Antes de cada preparación higiénica, asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Desenchufe la clavija de alimentación antes de cada preparación higiénica.
- Asegúrese de que no puedan llegar líquidos al aparato.