

DOPPLER FETAL

MARCA: EDAN

MODELO: Sonotrax II Pro

USO: El doppler fetal junto con las sondas impermeables de 2 MHz y 3 MHz están indicados para detectar la frecuencia cardíaca fetal desde el inicio del embarazo hasta el parto y para confirmar el buen estado del feto.

COMPONENTES



Panel frontal

1. Pantalla
2. Botón de encendido / apagado
3. Altavoz


4. Conector de sonda

Panel posterior



5. Soporte de sonda
6. Compartimento para pilas

Panel superior

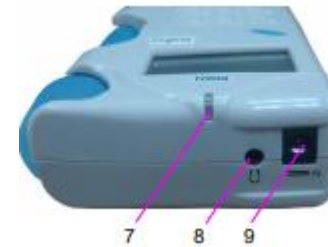

7. Indicador de carga / indicador de alimentación
8. Conector de auriculares
9. Conector de carga

Panel izquierdo



10. Control de volumen
11. Botones

Pantalla



1. Valor de frecuencia cardíaca
2. Modo de funcionamiento
3. Indicador de reproducción
4. Indicador de grabación
5. Indicador de carga de pila
6. Valor numérico de frecuencia cardíaca fetal
7. Tipo de sonda

PASOS DE OPERACIÓN

1. Pulse el botón de encendido/apagado del panel frontal para encender el sistema Doppler.
2. Si la sonda está desconectada o no está conectada correctamente, el mensaje "--- MHz" parpadea en la pantalla LCD. Debe conectar la sonda correctamente.
3. Una vez conectada la sonda correctamente, la indicación de la pantalla LCD deja de parpadear y la frecuencia de sonda se muestra en la esquina inferior derecha.
4. Pulse el botón (Modo) del panel izquierdo para cambiar entre estos modos del sistema Doppler. El modo se muestra en la

esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

5. Al encender el sistema Doppler, el modo 1 se activa automáticamente.
6. Si no se detecta novedad alguna, el equipo se apagará automáticamente en 60 segundos

DOPPLER FETAL

MARCA: EDAN

MODELO: Sonotrax II Pro

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga la superficie externa del dispositivo limpia y elimine el polvo y la suciedad.

Limpie la superficie externa (incluida la pantalla) de la unidad principal con un paño seco. Si es necesario, use un paño humedecido con agente desinfectante, y seque con otro seco de inmediato.

Retire los restos de gel ecográfico de la sonda. Limpie la sonda con un paño humedecido con agente desinfectante y, a continuación, deje secar al aire o elimine la humedad con un paño suave seco

El proceso anteriormente descrito debe realizarse semanalmente y después de haber usado el dispositivo.