


LAMPARA DE FOTOCURADO

MARCA: WOOKPECKER

MODELO: B-CURE

Uso: utilizado para restaurar dientes, solidificación de resinas fotosensibles, acelerador de blanqueamiento emitiendo radiaciones luminosas por periodos cortos.

COMPONENTES Y PARTES

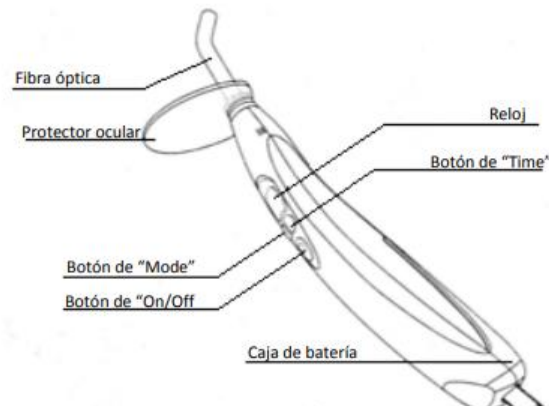

ARME Y DESARME

1. Inserte cuidadosamente el casquillo de metal de la fibra óptica en la pieza de mano, no empuje, enrosque.
2. Retire el protector ocular del extremo de la fibra óptica.
3. Para cambiar la batería recargable; apriete el botón de liberación en el fondo de la pieza de mano, tire la cobertura hacia atrás y quítelo.
4. Retire la batería recargable, colóquela a cargar e inserte la batería ya cargada.
5. Tape con la cubierta el extremo donde se ubican las baterías

FUNCIONAMIENTO

1. Presione el botón "mode" para elegir la función deseada las cuales pueden ser: alta potencia o sistema intermitente.
2. Presione el botón "time" para elegir uno de los 8 ajustes disponibles: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 segundos.
3. Las configuraciones quedarán guardadas y serán usadas por el equipo hasta tanto no lo cambie el operador del equipo.
4. Presione el botón "on/off" y la unidad indicará con un sonido bip; posteriormente el led iluminará
5. El reloj de la pieza de mano contará en descenso y cuando llegue a cero, el led se acabará.
6. Si requiere pausar el procedimiento en cualquier momento presione el botón "on/off"

7. El equipo de apagará automáticamente si no se utiliza por un tiempo de 2min.

ESTERILIZACION DE LA FIBRA OPTICA

1. Coloque la fibra en una gasa o bolsa de esterilización.
2. La temperatura máxima que resiste la fibra óptica es 134°C

LAMPARA DE FOTOCURADO

MARCA: WOODPECKER

MODELO: B-CURE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Para la limpieza y desinfección:

- Humedezca un paño o compresa con una solución neutra y/o no clorada, la cual sea detergente y desinfectante.
- Frote las superficies del equipo eliminando la suciedad externa.
- Humedezca un paño nuevo con agua y frote las superficies.
- Desinfecte con alcohol etílico u isopropílico al 70%
- Retire posteriormente los restos de alcohol con un paño humedecido con agua, repita este paso 3 veces.

Este procedimiento se debe realizar mínimo semanalmente, o con más frecuencia de acuerdo con nivel de uso.