


GUIA DE USO RÁPIDO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC10



1. Pantalla de visualización.
2. Luz de alarma: nivel alto parpadeo rápido rojo; nivel medio parpadeo lento amarillo; alarmas fisiológicas nivel bajo amarillo permanente.
3. Restablecer alarmas.
4. Pausar o restaurar alarmas.
5. Iniciar o pausar la toma de NIBP.
6. Congelar o descongelar ondas.
7. Menú principal o para cerrar un menú abierto.
8. Indicador de batería.
9. Indicador de alimentación AC
10. Led de encendido y apagado
11. Mando rotatorio

GUIA DE USO RÁPIDO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC10

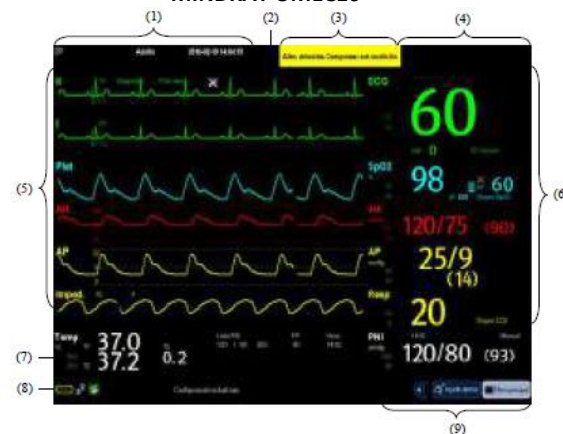

Recuerde que la pantalla no es táctil, para acceder a alguna de las funciones del equipo, delécese con el mando rotatorio y presionelo para confirmar.

1. Área de información del paciente
2. Símbolos de alarma
3. Área de alarmas técnicas
4. Área de alarmas fisiológicas
5. Área de ondas
6. Área "A" de parámetros
7. Área "B" de parámetros
8. Área de mensajes de indicación
9. Teclas de acceso rápido