


MONITOR FETAL

MARCA: EDAN

MODELO: F3

USO: destinado al control o monitoreo no invasivo de un feto único o gemelar durante el examen antes del parto, el trabajo de parto y post parto.

COMPONENTES DEL EQUIPO

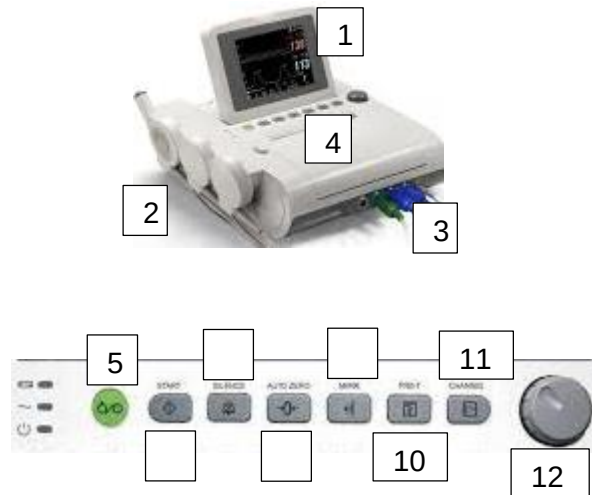


INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el equipo a la red eléctrica y sus transductores en los puertos correspondientes (3). Utilice los soportes (2) que dispone el

- equipo para sostener los transductores mientras o los esté utilizando. Evite golpearlos.
2. Encienda el dispositivo del botón On/Off (5).
 3. Coloque los transductores de la forma en la que se ilustra la imagen, asegure los transductores en el abdomen de la materna con las bandas elásticas que trae el equipo.
 4. Visualice las variables y ondas en pantalla (1).
 5. Una vez garantice buena señal uterina y fetal, ajuste a cero (8) para iniciar el monitoreo.
 6. Una vez haya realizado los ajustes anteriormente descritos, puede empezar el monitoreo presionando el botón (6), cuando inicie la impresión, el papel (4) empezará a desplazarse hacia afuera del equipo.
 7. Para acceder al menú y sub menús presione el botón (12) y navegue en el menú girando la perilla según lo requiera.
 8. Durante el monitoreo, si la materna presenta algún evento, puede utilizar el accesorio marcador de eventos mediante el cable o presionar el botón (9) en el panel del equipo.
 9. Utilice el botón de cambio de canal (11) de acuerdo al canal donde haya conectado el transductor de US.
 10. Utilice el botón (7) para silenciar las alarmas que se presenten durante el monitoreo.
 11. Una vez finalice el monitoreo, presione la tecla de impresión (10) para detener la impresión.

NOTA: recuerde que el único transductor que requiere gel conductor es el transductor de ultrasonido. **NO** utilice gel con el transductor TOCO.

COLOCACIÓN CORRECTA DE TRANSDUCTORES

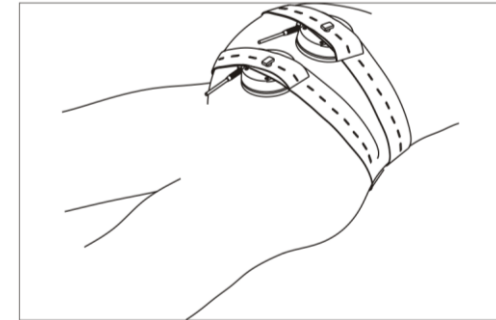

MARCA: EDAN

MODELO: F3

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Asegúrese que el equipo esté apagado y desconectado de la red eléctrica.
- Humedezca una compresa o paño seco con alcohol al 70%
- Limpie el equipo y cada uno de sus accesorios. No deje que el líquido entre a las ranuras.
- Remueva el exceso de gel del transductor de US, verifique que el transductor TOCO no tenga residuos de gel en el canal, si los tiene, retírelo con especial precaución.

Para la desinfección se recomienda el uso de etanol al 70%, isopropanol 70%, NO utilice soluciones cloradas.

Este procedimiento se debe realizar después de cada uso.