

PULSOXIMETRO

MARCA: EDAN
MODELO: H100B

USO: El oxímetro está pensado para monitorización continua de la función de saturación arterial (SpO2) y la tasa de pulso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales

COMPONENTES DEL EQUIPO



1. Botón de On/Off
2. Botón de alarma
3. Botón de desplazamiento inferior

4. Botón de control de brillo
5. Botón de desplazamiento superior
6. Botón de función


Con el oxímetro apagado, presione la tecla de manera síncrona el botón de On/Off junto con el botón de función.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte el sensor de oximetría en el puerto de la parte superior del oxímetro
2. Encienda el dispositivo del botón On/Off
3. Seguido a esto se mostrarán los logos de la casa comercial y se iniciará la toma de los valores de manera automática.
4. Localice el sensor en el dedo del paciente.
5. El resultado se mostrará en pantalla.


MODO DE FORMA DE ONDA

Se muestra la saturación, el pulso cardíaco, el nivel de saturación de oxígeno y la gráfica pletoisométrica

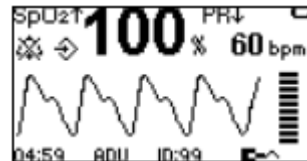


MODO DE NÚMERO GRANDE

El oxímetro puede presentar SpO2, saturación de oxígeno en unidad, ritmo cardíaco (bpm) en el modo de numeros grandes

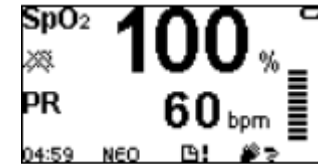

GRÁFICOS DE TENDENCIAS

Presione el botón de desplazamiento superior para ingresar a la última toma de SpO2 y la de desplazamiento inferior para ingresar a los últimos diez minutos.

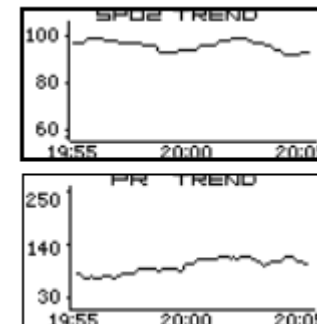

MARCA: EDAN
MODELO: H100B

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Para la limpieza del pulsioxímetro debe seguir los siguientes pasos:

- Asegúrese que el equipo esté apagado.
- Humedezca una compresa o paño seco con alcohol al 70%.
- Limpie el equipo. (No deje que el líquido entre a las aberturas de este)
- Remueva el exceso de líquido con un paño seco.

Nota: Se recomienda no usar detergentes ni disolventes para una buena limpieza.

Para la desinfección se recomienda el uso de etanol al 70%, isopropanol 70%. NO utilice soluciones cloradas.

Este procedimiento se debe realizar después de cada uso.