


BÁSCULA DIGITAL

MARCA: HEALTH O METER

MODELO: 522KL

USO: Equipo para medir la masa de un cuerpo con la mayor precisión posible.

CONTROLES

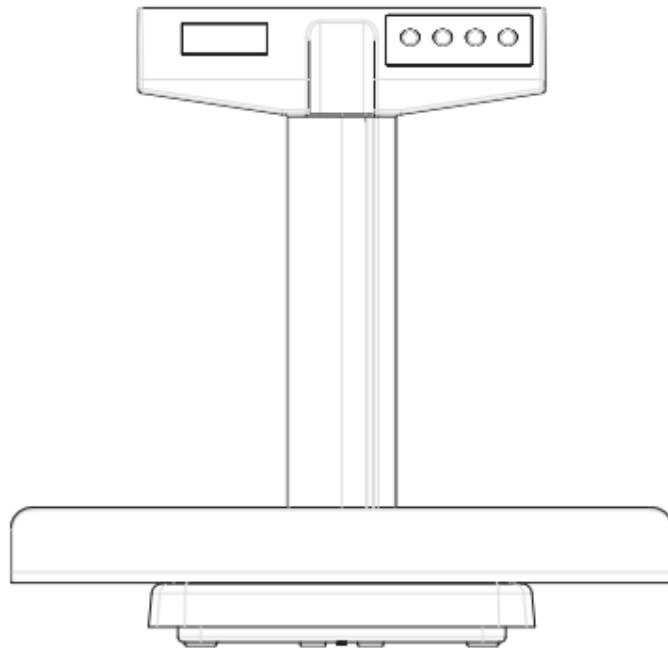

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque seis baterías alcalinas nuevas AA en el compartimiento correspondiente.

2. Coloque la balanza en una superficie rígida y plana para asegurar su seguridad y exactitud.
3. Oprima el botón ON/OFF para encender la unidad. En el visor se mostrará 88:8.8.8 y luego 0:0.0 junto con LB, a la derecha del visor (o 0.00 KG).
 - Para cambiar las unidades a KG, oprima el botón KG/LB una vez.
4. Coloque el bebé en la balanza de modo que el peso quede distribuido uniformemente en la bandeja.
5. Cuando se calcula un peso estable, un anillo pequeño aparecerá en la esquina izquierda superior del visor, junto con el peso del bebé. Según las unidades seleccionadas, el peso se muestra en libras y onzas (LB) o en decimales (KG).
6. Si en el visor se muestra el mensaje "OVER", se ha excedido la capacidad de la balanza.

FUNCIÓN DE TARA

Si la sustancia que va a pesar se encuentra en un recipiente, primero pese el recipiente vacío y use la función de Tara, la balanza se pondrá de nuevo en cero. La masa del recipiente se restará de las próximas medidas.

1. Pese el objeto.
2. Oprima y libere el botón ZERO/CLEAR para cambiar el peso a 0.
3. Coloque el bebé en la bandeja de la balanza y péselo como lo hace normalmente

BÁSCULA PEDIÁTRICA**MARCA:** HEALTH O METER**MODELO:** 522KL**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

El equipo deberá limpiarse después de cada uso, o en caso de no usarse, semanalmente. Si el entorno de utilización está muy sucio o está muy expuesto a acumulación de polvo, el equipo deberá limpiarse con más frecuencia.

Para la limpieza y desinfección del equipo, siga los siguientes pasos:

Frote el equipo con un paño limpio, suave, y humedecido con amonio cuaternario.

Si es necesario, retire los excesos de la solución limpiadora con un paño seco después de la limpieza.

Las recomendaciones siguientes son con motivo de prolongar la vida útil de la balanza:

Esta balanza contiene piezas electrónicas. Utilícese con cuidado. No la deje caer o la golpee.

No guarde la balanza en posición vertical.