


GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN SXT-5A

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ La unidad debe trabajar dentro de 30 minutos con carga intermitente. El ciclo de trabajo es mayor que 50%;
- ✓ Por favor evite usar la unidad cerca de agentes inflamables y/o volátiles;
No succiones gases o líquidos altamente inflamables;
- ✓ La desinfección y esterilización debe cumplir el método recomendado por el fabricante o cumplir con las normativas de hospitales.
- ✓ Prohibido sumergir el equipo en agua u otro líquido;
- ✓ El equipo debe ser operado con filtro de aire y manguera de succión. No conecte el catéter de flema directamente al empalme del paciente de la botella marcada como "IN"
- ✓ Antes de conectar la unidad al suministro principal de potencia, por favor asegúrese de que el voltaje de la unidad sea consecuente con el del suministro principal de potencia;
- ✓

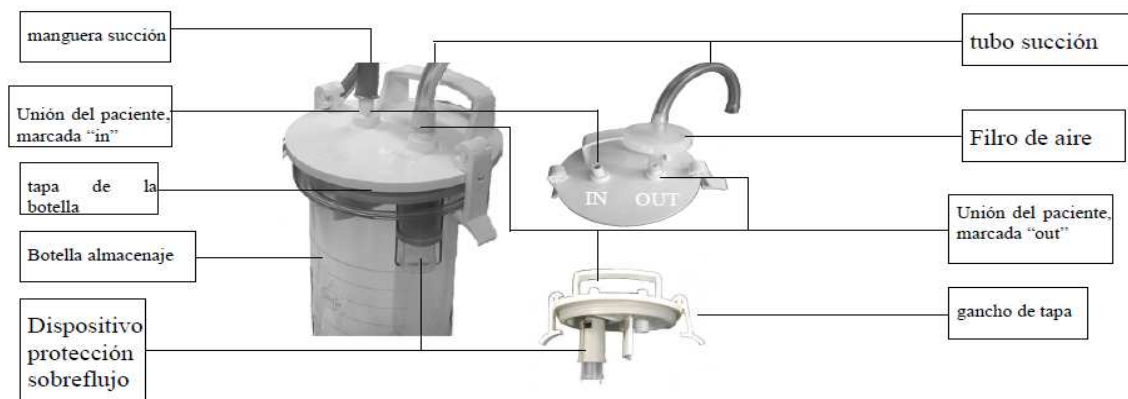

Construcción de la botella de almacenaje (ver Fig.1)

Desensamblaje del dispositivo de protección de sobre-flujo de la tapa de la botella (ver Fig.2)

Desenroscar la tapa y abrir la tapa de la botella con el dispositivo de protección de sobre-flujo, girar el dispositivo de protección de sobre-flujo en sentido antihorario hasta que se suelte de la tapa.



OPERACIÓN

1. Conectar el suministro de potencia principal


Antes de conectar la unidad al suministro de potencia principal, por favor asegúrese de que el voltaje de la unidad sea consecuente con el del suministro principal de potencia y el

interruptor esté en la posición “OFF”. Y cuando se inserte el enchufe en el zócalo de suministro de potencia, ilumine el LED indicador.

El dispositivo que separa la unidad del suministro principal de potencia es el enchufe de cordón de potencia.

2. Verificar conducto

Por favor ponga en ON para iniciar la unidad con el conector marcado “IN” en la tapa de la botella ocluido, y gire el regulador de vacío en sentido horario o antihorario y el indicador de vacío varía entre 150mmHG y el máximo vacío. El nivel de vacío puede ajustarse por el regulador de acuerdo al requerimiento clínico.

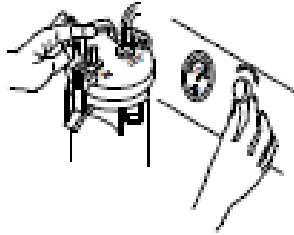

TGire el regulador de vacío en sentido horario para incrementar el vacío

3. Operación

- ✓ Antes de usar, inspeccione el aparato de acuerdo al procedimiento de ensamblaje, y asegúrese de que su unidad de succión esté en bien colocada. Gire el regulador de vacío en sentido horario o antihorario hasta que se obtenga el requerimiento clínico. Conecte un extremo de la manguera de succión esterilizada a la entrada de la botella de almacenamiento y entonces conecte el catéter de flema requerido al otro extremo de la manguera de succión esterilizada. Ahora está lista para operar.

Antes de detener el trabajo, succione un poco de agua limpia para ayudar a la limpieza de la manguera de succión.



4. Utilización de la cubeta de limpieza

Usualmente, alguna solución desinfectante puede colocarse en la cubeta de limpieza, que se usa para colocar el catéter antes y después de la operación.

5. Detención del trabajo

Después de ajuste u operación, por favor ponga en OFF y entonces saque el enchufe del zócalo para cortar el suministro principal de potencia.