

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DATOS DE BAJA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI / BOLIVAR
2023

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DATOS DE BAJA

URGENCIAS

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART R3	
SERIE	FK-84014464	
N. INV:	0223	SERVICIO: URGENCIAS - SALA DE HOMBRES
CIUDADY FECHA:	04 JUL 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar gabinete, carcasa y aspecto físico en general	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar cables, electrodos, terminales, y demás elementos electricos y electronicos	☒
Limpiar y verificar el sistema de transporte de papel	☒
Verificar impresora o aguja marcadora (alineación, estado y funcionamiento), control térmico y presión mecánica, calibrar si es necesario.	☒
Revisar carga de baterías	☒
Realizar prueba de señal (1mV) y compruebe su forma y amplitud	☒
Verificar con simulador de ECG señal de prueba	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒	Funcional
☐	Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Ibarra

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-7B000190	
N. INV:	0011	SERVICIO: URGENCIAS - REANIMACIÓN
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar baterías e indicador de carga	☒
Verificar circuito de descarga interna	☒
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	☒
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	☒
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	☒
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIO DE PARCHES PARA DESFIBRILACIÓN

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento

RECIBE:

Johann Ibarra

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	65 777	
SERIE		
N. INV:	.0252	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	CONSULTORIO DE TRIAGE

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Lora

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	65 777	
SERIE		
N. INV:	0009	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	CONSULTORIO DE URGENCIAS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Vasquez

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLER FETAL	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX	
SERIE	560042-M22609760024	SERVICIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
N. INV:	.0348	
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

--

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferraz
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johann Igarra

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LARINGOSCOPIO ADULTO	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	60813	
SERIE	50121	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar externamente (contacto de baterías, bombillos, hojas)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento del mango con cada hoja	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Ibarra

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LARINGOSCOPIO ADULTO	SEÑOR(ES):
MARCA	RIESTER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA -
MODELO		SIMITI
SERIE	8080-8110	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar externamente (contacto de baterías, bombillos, hojas)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento del mango con cada hoja	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Lora Cano

EQUIPO	LAMPARA PIELITICA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED760	SERVICIO: PROCEDIMIENTOS - CURACION 1
SERIE	.0010	
INV.	.0162	
CIUDAD Y FECHA	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johann Igarra

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	DI22EGAF076	
N. INV:	0025	URGENCIAS - SALA ERA
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Ibarra

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BASCULA CON TALLIMETRO MECANICA	SEÑOR(ES):
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	K180	
SERIE		
N. INV:	.0269	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - STAN DE ENFERMERIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Lora

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767-SERIES	
SERIE	191126103345	
N. INV:	.0345	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL 2023	URGENCIAS - SALA DE REANIMACIÓN

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Lopez

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	767-SERIES	
SERIE	200804132075	
N. INV:	.0304	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - SALA ERA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Lopez

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	COMEN	
MODELO	C21	
SERIE	KI220106018	
N. INV:	0387	SERVICIO URGENCIAS - SALA DE MUJERES
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STU

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Iorgano

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767-01	
SERIE	180221135825	
N. INV:	0253	SERVICIO: URGENCIAS - TRIAJE
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE DOS VÍAS

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Ibarra



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	TENSIOMETRO DE PARED
MARCA/MODELO:	WELCH ALLYN - 767-01
NÚMERO DE SERIE:	180221135825
INSTALADO EN:	URGENCIAS - TRIAJE

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE DOS VÍAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE DOS VÍAS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
Firma de quien entrega


Gilbert Cuellar
Firma de quien recibe

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767-01	
SERIE	180221071175	
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

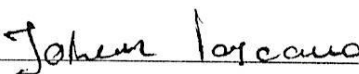
OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE DOS VÍAS

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	TENSIOMETRO DE PARED
MARCA/MODELO:	WELCH ALLYN - 767-01
NÚMERO DE SERIE:	180221071175
INSTALADO EN:	CONSULTORIO DE URGENCIAS

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE DOS VÍAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE DOS VÍAS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609-181
Firma de quien entrega


Gilbert Cuellar
Firma de quien recibe

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767-01	
SERIE	200617072355	
N. INV:	.0274	SERVICIO: CONSULTORIO DE URGENCIAS
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE DOS VÍAS

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Jhon Carlos



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	TENSIOMETRO DE PARED
MARCA/MODELO:	WELCH ALLYN - 767-01
NÚMERO DE SERIE:	200617072355
INSTALADO EN:	CONSULTORIO DE URGENCIAS

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE DOS VÍAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE DOS VÍAS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STB
Firma de quien entrega
RH 201609 - 481

 **Gilbert Correal**
Firma de quien recibe

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	DEVILBISS	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	5650D	
SERIE	D7001383	
N. INV:	.0193	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS SALA DE HOMBRES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO TABACO

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Johann Lopez



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	NEBULIZADOR
MARCA/MODELO:	DEVILBISS - 5650D
NÚMERO DE SERIE:	D7001383
INSTALADO EN:	URGENCIAS - SALA DE HOMBRES

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- FILTRO TIPO TABACO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE FILTRO TIPO TABACO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089-33926670
Firma de quien emite el reporte
RH - 201609 - 481


Gilbert Cuellar
Firma de quien recibe

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	THOMAS	
MODELO	1630 GL	
SERIE	061600012525	
N. INV:	0040	SERVICIO: URGENCIAS - REANIMACIÓN
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SE REALIZO CAMBIO DE FILTRO HIDROFOBICO

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Jarama



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	SUCCIONADOR
MARCA/MODELO:	THOMAS - 1630GL
NÚMERO DE SERIE:	061600012525
INSTALADO EN:	URGENCIAS - REANIMACIÓN

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- FILTRO HIDROFOBICO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE FILTRO HIDROFOBICO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 339269670
Firma de quien emite el reporte
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES):
MARCA	THOMAS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	1630GL	
SERIE	061600012519	
N. INV:	.0436	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - PROCEDIMIENTOS CURACION 1

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

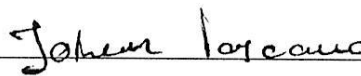
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE 120	
SERIE	J3300QD02810	
N. INV:	0224	SERVICIO: URGENCIAS - SALA EDA
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

SE REALIZO CAMBIO DE BRAZALETE DE UNA VIA, REQUIERE SUMINISTRO DE SENSOR DE OXIMETRÍA.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Iorgano

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA/MODELO:	CREATIVE MEDICAL - ADVANCE 120
NÚMERO DE SERIE:	J3300QD02810
INSTALADO EN:	SALA EDA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE UNA VIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

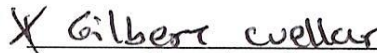
SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE UNA VÍA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

PENDIENTE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA.

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089-339269-600
Firma de quien emite
RH - 201609 - 481


Gilbert Celler
Firma de quien recibe

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	EDAN	
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560019	
N. INV:	0021	SERVICIO: URGENCIAS - SALA ERA
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☐ Fuera de servicio

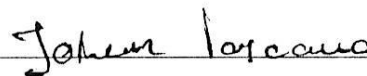
OBSERVACIONES:

SE REALIZO CAMBIO DE BRAZALETE DE UNA VIA - REQUIERE SOPORTE O MESA,
REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 04 DE 2023
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA/MODELO:	EDAN - IM70
NÚMERO DE SERIE:	261236-M18505560019
INSTALADO EN:	SALA ERA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- BRAZALETE DE UNA VIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

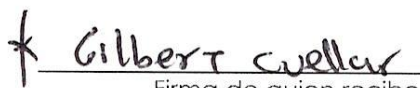
SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE BRAZALETE DE UNA VÍA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

PENDIENTE CAMBIO DE SENSOR DE OXIMETRIA, REQUIERE SOPORTE.

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimientos
T.P. 68089 - 339269 STD
RH 201609-481


Firma de quien recibe

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE 100	
SERIE	J3000QD00097	
N. INV:	.0244	SERVICIO: URGENCIAS - TRIAJE
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento

RECIBE:

Johann Lora Cano

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD00136	
N. INV:	.0226	SERVICIO: URGENCIAS - SALA DE MUJERES
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REQUIERE BRAZALETE Y EXTENSION

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Larceno

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560006	
N. INV:	0039	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - SALA DE MUJERES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

NO SE ENCONTRO SENSOR DE OXIMETRÍA

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Lopez

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560022	
N. INV:	0018	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	UREGENCIAS - REANIMACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Lopez

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	261236-M18505560025	
N. INV:	0004	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - SALA DE HOMBRES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

EQUIPO SE ENCUENTRA SIN SENSOR DE OXIMETRÍA

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Johann Lozano

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	MEC-1000	
SERIE	AQ-36190099	
N. INV:	.0255	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	URGENCIAS - PEDIATRIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

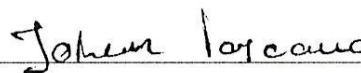
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

ODONTOLOGIA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UNIDAD ODONTOLOGICA # 1	SEÑOR(ES):
MARCA	KROMADENT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	FUTURA- SEMI ELECTRICA	
SERIE	06678	
N. INV:	0133	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar fugas de manguera de agua y de aire	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de presión de agua	✓
Revisar presión de trabajo para pieza de alta y pieza de baja (Max 35 PSI)	✓
Revisar drenaje de escupidera y válvula eyectora	✓
Verificar estado de manómetro, cambiar si es necesario	✓
Verificar funcionamiento eléctrico o neumático de silla y su espaldar	✓
Verificar estado de eyector, jeringa triple, reostato, pieza de alta y baja, holders, negatoscopio	✓
Verificar el funcionamiento general (eléctrico, neumático, mecánico).	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de Acople para cambio de drenaje de escupidera, válvula reguladora de escupidera adaptación de manguera para escupidera y válvula reguladora de presión, mantenimiento preventivo integral, se realiza cambio de llave para suministro de agua.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferraz
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 05 DE 2023
EQUIPO:	UNIDAD ODONTOLOGICA
MARCA/MODELO:	KROMADENT - FUTURA
NÚMERO DE SERIE:	06-678
INSTALADO EN:	ODONTOLOGIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- ACOPLER PARA CAMBIO DE DRENAJE DE ESCUPIDERA
- VÁLVULA REGULADORA DE ESCUPIDERA
- ADAPTACIÓN DE MANGUERA PARA ESCUPIDERA.
- VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN.

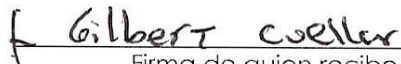
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
CAMBIO DE LLAVE DE SUMINISTRO DE AGUA.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
C.C. 68089-33928-99
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 05 DE 2023
EQUIPO:	UNIDAD ODONTOLOGICA
MARCA/MODELO:	KROMADENT - FUTURA
NÚMERO DE SERIE:	06-678
INSTALADO EN:	ODONTOLOGIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD NUEVA SN. 0BB201137

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR ENTREGA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, PERTENECIENTE AL KIT DE PIEZAS DE MANO QUE SE ENCONTRABA PENDIENTE.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
Firma de quien entrega
C.P. 68089-339269 STU
RH - 201609 - 481

X Gilbert Celler
Firma de quien recibe

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UNIDAD ODONTOLOGICA # 2	SEÑOR(ES):
MARCA	KROMADENT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	FUTURA - SEMI ELECTRICA	
SERIE	6679	
N. INV:	138	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar fugas de manguera de agua y de aire	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de presión de agua	✓
Revisar presión de trabajo para pieza de alta y pieza de baja (Max 35 PSI)	✓
Revisar drenaje de escupidera y válvula eyectora	✓
Verificar estado de manómetro, cambiar si es necesario	✓
Verificar funcionamiento eléctrico o neumático de silla y su espaldar	✓
Verificar estado de eyector, jeringa triple, reostato, pieza de alta y baja, holders, negatoscopio	✓
Verificar el funcionamiento general (eléctrico, neumático, mecánico).	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AMALGAMADOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	MILLENIUM	
MODELO	2000	
SERIE	AML15-26350	
N. INV:	.0145	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar dosificación.	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BONART	
MODELO	ART MAVERICK	
SERIE	DC-51109	
N. INV:	.0135	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar pedal	✓
Verificar estado de filtro de agua	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar irrigador bucal	✓
Verificar funcionamiento electrico	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DBA	
MODELO	D5	
SERIE	D7202099213	
N. INV:	.0144	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar pedal	✓
Verificar estado de filtro de agua	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar irrigador bucal	✓
Verificar funcionamiento electrico	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CAVITRON	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BONART	
MODELO	ART MAVERICK	
SERIE	DC-51108	
N. INV:	.0139	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDADY FECHA:	04 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar pedal	✓
Verificar estado de filtro de agua	✓
Revisar drenaje de escupidera y valvula eyectora	✓
Verificar irrigador bucal	✓
Verificar funcionamiento electrico	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

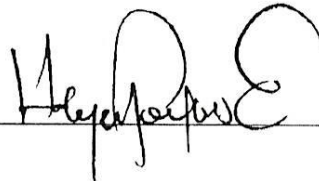
☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DENTOMAT	
MODELO	3000-S	
SERIE	1033	
N. INV:	.0134	SERVICIO: ODONTOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	

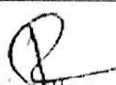
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar estado del empaque de la puerta	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada(válvula múltiple, tuberías, etc.)	✓
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	✓
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	✓
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	✓
Verificar estado de temporizador	✓
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	✓
Verificar estado de válvula de seguridad	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

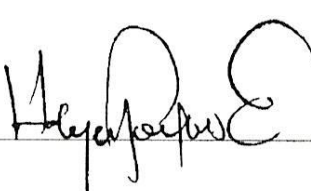
- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plata Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOCURADO	SEÑOR(ES):
MARCA	DBA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	LED D	
SERIE	L1830602C	
N. INV:	.0140	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar la fotopolimerizacion	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Verificar estado de filtro y fibra optica	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de carga de bateria	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierpo
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Viario Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOCURADO	SEÑOR(ES):
MARCA	DBA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	LED D	
SERIE	L1830627C	
N. INV:	.0141	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar la fotopolimerizacion	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Verificar estado de filtro y fibra optica	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Revisar sistema de carga de bateria	✓
Verificar el funcionamiento general (electrico, neumatico, mecanico) del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Viarco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X PERIAPICAL	SEÑOR(ES):
MARCA	FIAD	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ELITY 70	
SERIE	70M1-1275	
N. INV:	.0136	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL. 2023	ODONTOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Verificar conector de tubo de rayos X	✓
Verificar estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos	✓
Verificar estado de perillas y lámpara indicadora	✓
Lubricar articulación de brazo portatubo, si es necesario	✓
Verificar funcionamiento del compensador de voltaje de línea si aplica.	✓
Verificar corrientes del tubo y tiempo de exposición	✓
Verificar el funcionamiento y realizar pruebas de funcionamiento general	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Valencia

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	COMPRESOR ODONTOLOGICO	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR SERVICIO: ODONTOLOGIA
MARCA	SCHULZ - 4HP	
MODELO	MSV 12	
SERIE	354354	
N. INV:		
CIUDAD Y FECHA:	04 JUL 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar cables de alimentación y protección eléctrica	✓
Inspeccionar uniones y empaques	✓
Revisar valvula de seguridad	✓
Revisar Presostato y su calibracion	✓
Verificacion sistema electrico	✓
Verificar drenaje de tanque de presión y registro de salida	✓
Verificar presión (35 a 40 PSI) y filtro de salida de presión, drenar si es necesario	✓
Verificar arranque y paro del compresor	✓
Verificar consumo de corriente eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández

REALIZADO POR:

Ing. Mantenimiento

RECIBE:

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

Marco Aurelio Rueda Valencia

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	COMPRESOR ODONTOLOGICO
MARCA/MODELO:	SCHULZ - MSV12 - 4HP
NÚMERO DE SERIE:	354354
INSTALADO EN:	ODONTOLOGIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- DOS (2) CONDENSADORES DE 270 A 324 mF - 110V. - DOS (2) BIELAS, - CUATRO (4) JUEGOS DE ANILLOS. - TRES (3) JUEGO DE RODAMIENTOS PARA BIELAS..

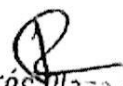
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

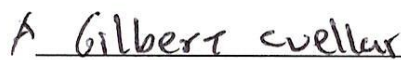
SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA CAMBIO DE FILTROS, VÁLVULA DE DRENAJE Y PRESOSTATO DE PRESIÓN.

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089-339269
Firma de quien emite
RH - 201609 - 481


A Gilbert Cuellar
Firma de quien recibe



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 05 DE 2023
EQUIPO:	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD
MARCA/MODELO:	APPLE DENTAL - L GREEN
NÚMERO DE SERIE:	AM170816001-A
INSTALADO EN:	ODONTOLOGIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE REALIZA TRASLADO DEL EQUIPO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH 201609-481


Firma de quien recibe

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

LABORATORIO CLINICO

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA **SIMITI – BOLIVAR**

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BAÑO SEROLOGICO	SEÑOR(ES):
MARCA	MEMMERT	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	0	
SERIE	DIN12876-3-K1	
N. INV:	.0086	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos	✓
Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes)	✓
Verificar control automático de temperatura	✓
Verificar temperatura con termómetro de mmHg	✓
Inspeccionar lámparas de señalización	✓
Comprobar tiempo de alcance de temperatura	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza FERNANDEZ
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROSCOPIO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	LABOMED	
MODELO	LX 400	
SERIE	140665572	
N. INV:	100	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Limpiar, lubricar y ajustar el sistema porta lamina	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plata Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROSCOPIO	SEÑOR(ES):
MARCA	LABOMED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	LX 400	
SERIE	140665600	
N. INV:	.0102	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Limpiar, lubricar y ajustar el sistema porta lamina	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	SEÑOR(ES):
MARCA	BOECO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	5020	
SERIE	1407-0206	
N. INV:	.0085	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	☒
Verificar perillas de control y señalizaciones	☒
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	☒
Verificar medidor de tiempo	☒
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

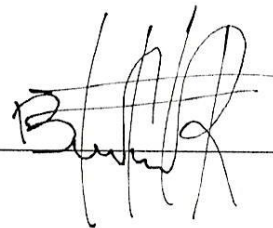
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR HEMATOLOGICO BASCULANTE	SEÑOR(ES):
MARCA	INDULAB	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	2007	
SERIE		
N. INV:	0424	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIOCLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	OPTIMA	
MODELO	DSR-2100B	
SERIE	1.302.096	
N. INV:	.0090	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

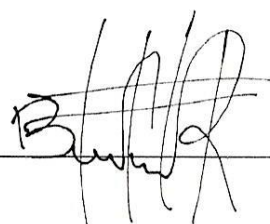
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROCENTRIFUGA	SEÑOR(ES):
MARCA	BOECO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	HC240	
SERIE	.0000120	
N. INV:	.0092	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:		LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	✓
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

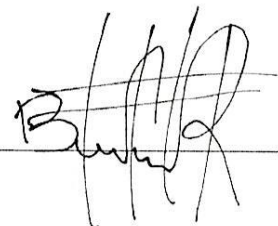
EQUIPO	CENTRIFUGA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CLAY ADAMS	
MODELO	6 TUBOS	
SERIE	5160019	
N. INV:	.0103	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.). Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SEROFUGA	SEÑOR(ES):
MARCA	CLAY ADAMS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	2002	
SERIE	5030027	
N. INV:	.0088	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	✓
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	HORNO DE CALOR SECO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	DKASA	
MODELO		
SERIE	KWS1523J-H12	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
N. INV:	0099	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.)	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador)	✓
Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores	✓
Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del	✓
Verificar protecciones y alarmas (sobretensión, no circulación del aire, etc.)	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

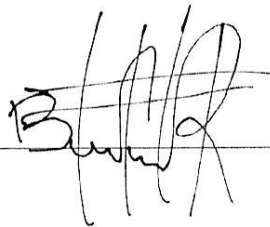
- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	I15	
SERIE	DM-005549	
N. INV:	.0094	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	☒
Revisar impresora	☒
Revisar mangueras y drenaje	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR QUIMICA SANGUINEA	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BIOSYSTEMS		
MODELO	BTS-360		
SERIE	801757982		
N. INV:	.0084	SERVICIO:	Laboratorio Clinico
FECHA:	05 JUL. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesar	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE: Bucaramanga

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE HEMATOLOGIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI / SUR DE BOLIVAR
MODELO	BC-5390	
SERIE	TM-23000574	
N. INV:	0372	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	☒
Revisar bomba peristaltica	☒
Revisar impresora	☒
Revisar mangueras y drenaje	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA MICRO ELISA	SEÑOR(ES):
MARCA	STAT FAX-2200	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
MODELO	AWARENESS TECHNOLOGY INC	PADUA DE SIMITI
SERIE	18956	
N. INV:	.0097	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar la estabilidad de la lámpara.	✓
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	✓
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	✓
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	✓
Verificación de valibración por filtros.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LECTOR DE PLACAS ELISA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
MODELO	MR-96A	PADUA DE SIMITI
SERIE	83108229	SERVICIO:
N. INV:	.0095	LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Verificar la estabilidad de la lámpara.	☒
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	☒
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	☒
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	☒
Verificación de valibración por filtros.	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE: [Firma]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
MODELO	MW-12A	PADUA DE SIMITI
SERIE	77105152	SERVICIO:
N. INV:	.0098	LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Desensamblar y limpiar los conductos y conectores.	✓
Verificar la integridad de los componentes mecánicos.	✓
Confirmar la integridad del conector eléctrico y el cable de interconexión	✓
Verificar calibración del sistema.	✓
Lubricación general.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: [Firma]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEVERA REACTIVOS	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	SUPERNORDICO	
MODELO		
SERIE	P-1407	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
N. INV:	.0096	
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Efectuar limpieza general de condensador y del evaporador	✓
Revisar sistema eléctrico	✓
Lubricar los motores y ventiladores	✓
Verificar la temperatura	✓
Verificacion del soporte y tornillos de la puerta	✓
Verificacion del funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: [Firma]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEVERA REACTIVOS	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MARCA	IMBERA	
MODELO	VR09 D BMAE SAB CO	
SERIE	920180480063	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
N. INV:	.0106	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	☒
Efectuar limpieza general de condensador y del evaporador	☒
Revisar sistema eléctrico	☒
Lubricar los motores y ventiladores	☒
Verificar la temperatura	☒
Verificación del soporte y tornillos de la puerta	☒
Verificación del funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEVERA REACTIVOS	SEÑOR(ES):
MARCA	BIORED	ESE HOSPITAL
MODELO		SAN ANTONIODE PADUA - SIMITI
SERIE		SERVICIO:
N. INV:	.0104	LABORATORIO CLINICO
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	☒
Efectuar limpieza general de condensador y del evaporador	☒
Revisar sistema eléctrico	☒
Lubricar los motores y ventiladores	☒
Verficar la temperatura	☒
Verificacion del soporte y tornillos de la puerta	☒
Verificacion del funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269570
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UROMETRO	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	SD STANDARD DIAGNOSTIC INC	
MODELO	UROMETER 120	
SERIE	120160428023	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
N. INV:	.0101	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Verificar la estabilidad de la lámpara.	☒
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	☒
Verificación de calibración.	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica y funcionamiento.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

SALA DE PARTOS

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	M18506950001	
N. INV:	0028	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetria	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Trivicio

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	IM70	
SERIE	M6305560024	
N. INV:	0036	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	SALA DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES):
MARCA	ADVANCED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		
SERIE	PM200M	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STB
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Ferrer
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	HK9010	
SERIE	22130504006	
N. INV:	.0041	SERVICIO: ATENCION NEONATOS
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	HKN-9010	
SERIE	22AHZD01013	
N. INV:	.0033	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 SED
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	SMAF	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	SXT-5A	
SERIE		
N. INV:	0016	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Revisar sellado de nivel de liquido	☒
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	☒
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-7B000191	
N. INV:	.0037	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar baterías e indicador de carga	✓
Verificar circuito de descarga interna	✓
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	✓
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	✓
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	✓
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:



Funcional



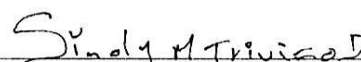
Fuera de servicio

OBSERVACIONES:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

REALIZADO POR:

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA -
MODELO	BENEHEART D3	SIMITI
SERIE	Z B600193	
N. INV:	.0035	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar baterías e indicador de carga	✓
Verificar circuito de descarga interna	✓
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	✓
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	✓
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	✓
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA DE TRANSPORTE	SEÑOR(ES):
MARCA	NINGBO DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	TI-2000	
SERIE	36AHZ001013	
N. INV:	.0032	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	SERVICIO: ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA CERRADA	SEÑOR(ES):
MARCA	ADVANCED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MODELO	YP-2060	
SERIE	13AHZE02001	
N. INV:	.0031	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna	✓
Revisar: gabinete, cubierta, mangas, portamangas y picaporte de sostén	✓
Verificar estado de partes móviles por posible desgaste,	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (calefactor, cable de alimentación, fusible, tomacorriente, etc.)	✓
Verificar estado y funcionamiento (incluyendo vibración) del motor ventilador, lubricar si	✓
Comprobar entrada de oxígeno, aire, depósito de agua, y filtro	✓
Realizar prueba de nivel de ruido (< 68 dB)	✓
Verificar indicadores y alarmas, visuales y acústicas (temperatura 30°C a 40°C) y sus sensores	✓
Verificar parámetros de funcionamiento: temperatura, oxígeno, humedad	✓
Comprobar funcionamiento de sistema servocontrolado	✓
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BASCULA PESA BEBES	SEÑOR(ES):
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ACS-20B-YE	
SERIE		
N. INV:	0044	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	767	SIMITI
SERIE	180417152635	
N. INV:	0030	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	SALA DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO DE PARED	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		SIMITI
SERIE	180417115985	
N. INV:	0238	SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCIÓN DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manómetro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferraz
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STB
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy R Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX	
SERIE	560042-M22201680030	
N. INV:	0349	SERVICIO PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierpo
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGAF074	
N. INV:	0034	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STB
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGBL009	
N. INV:	0026	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269510
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M. Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI ATENCION DE PARTOS
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGF075	
N. INV:	0005	
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL JOSE RUDECINDO LOPEZ PARODI
MARCA	MEDIFUSIÓN	
MODELO	DI2200	
SERIE	D122EGAF073	
N. INV:	0183	PREPARACION TRABAJO DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	U2	
SERIE	560225-M17307710001	
N. INV:	0075	ATENCION DE PARTOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Verificar filtro de aire	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andres Plaza Fernandez
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviso

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):
MARCA	DAVID	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	XHZ-90L	
SERIE:	A46BC0003004	
N. INV:	0418	ATENCION NEONATOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CIELITICA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	HYLED 600	
SERIE	39-85000269	
N. INV:		SERVICIO SALA DE LEGRADOS
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STD

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M. Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA CUELLO DE CISNE	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	SM	
MODELO	SM	
SERIE		SERVICIO: ATENCION DE PARTOS
N. INV:		
CUIDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo giratorio, articulaciones, etc.	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Limpiar los excesos de lubricante y secar las partes mojadas	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Focalización de las lámparas, si se requiere hacer este ajuste	☒
Verificar el funcionamiento	☒

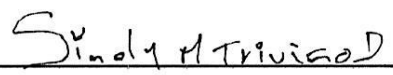
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:


Elber Andrés Plaza Fernández

REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	THOMAS	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE
MODELO	MEDI-PUMP	SIMITI
SERIE	061600012526	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDADY FECHA:	05 JUL. 2023	ATENCION NEONATOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

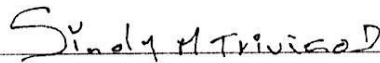
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAQUINA DE ANESTESIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	WATO EX - 65	DE PADUA
SERIE	KT-84001537	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0046	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	05 JUL. 2023	SALA DE LEGRADOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecánicas; identificar daños y partes faltantes	✓

Sistema de gases

Verificar la integridad de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared)	✓
Revisar el estado y lectura de los medidores de presión;	✓
Revisar el funcionamiento de las válvulas controladoras de flujo (válvula de inspiración y espiración)	✓
Verificar presiones en los reguladores	✓
Inspeccionar la tubería y adaptadores por fuga de gas	✓
Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión	✓
Verificar la ausencia de fugas en el sistema de baja presión,	✓
Inspeccionar todos los accesorios empaques O-ring, diafragmas y otro empaques	✓
Efectuar limpieza de flujómetros, revisar la calibración de estos	✓
Revisar físicamente los vaporizadores, verificar funcionamiento	✓

Canister

Drenar y limpiar el absorbedor (canister)	✓
Verificar el estado físico del canister	✓
Revisar empaques del canister, cambiar si es necesario	✓
Revisar físicamente las válvulas check de inhalación y exhalación	✓
Revisar y calibrar el medidor de presión	✓
Revisar la válvula APL, si está operando	✓
Haga la prueba de operación con toda la tubería conectada para verificar la expulsión del gas	✓
Verificar la operación y control de flujo de las válvulas de flujo de O2 y N2O	✓
Verificar el funcionamiento de todas las alarmas	✓

Ventilador de anestesia

Revisar el sistema de accionamiento del fuelle y su correcto funcionamiento	✓
Verificar el funcionamiento del ventilador	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos	✓
Efectuar pruebas de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Elber Andres Plaza Hernandez

Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy A Trujillo



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 05 DE 2023
EQUIPO:	MAQUINA DE ANESTESIA
MARCA/MODELO:	MINDRAY - WATO-EX65
NÚMERO DE SERIE:	KT84001537
INSTALADO EN:	SALA DE LEGRADOS

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REPUESTOS INSTALADOS

- CELDA DE OXIGENO SN: 712653195
- EMPAQUETADURA DE SISTEMA DE SALIDA DE GASES.
- VÁLVULA CHEQUE DE RESIDUOS DE GASES ANESTESICOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

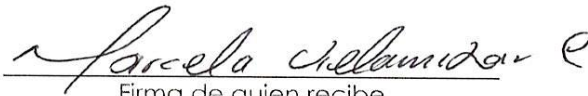
SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y SUMINISTRO DE CELDA DE OXIGENO. CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE SISTEMA DE SALIDA DE GASES Y CAMBIO DE VÁLVULA DE RESIDUOS DE GASES ANESTESICOS.

OBSERVACIONES

PENDIENTES CAMBIO DE BATERÍA

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089-339269
Firma de quien emite el reporte
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	TURBINA DE PRESIÓN PARA MAQUINA DE ANESTESIA
MARCA/MODELO:	SIEMENS 2CH2002
NÚMERO DE SERIE:	9089
INSTALADO EN:	CENTRAL DE GASES

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

DAÑO POR RECALENTAMIENTO

REPUESTOS INSTALADOS

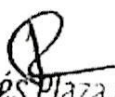
- EMBOBINADO DE MOTOR

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
Firma de quien entrega


Firma de quien recibe

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

CONSULTA EXTERNA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013753	SERVICIO: CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
N. INV:	0053	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero en Electricidad
ELECTROSAS



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931
E-mail: ingelectrosas@gmail.com
Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013628	
N. INV:	0055	SERVICIO: CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

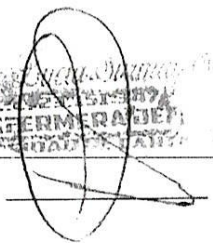
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero
ELECTROMECÁNICA
S.A.S.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	TENSO MED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO		
SERIE		
N. INV:	0300	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Staudius...
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA
S.A.S.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO	450KL	
SERIE	4500013757	
N. INV:	0062	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

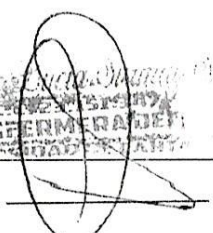
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Ingeniero de Mantenimiento



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA

Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931

E-mail: ingelectrosas@gmail.com

Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013618	
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	✓
Lubricar el sistema mecánico	✓
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	✓
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	✓
Verificar el funcionamiento	✓

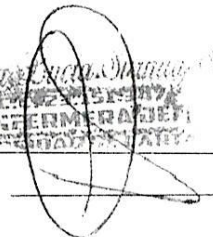
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STB
RH - 201609 - 481

RECIBE:


MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
Ingeniero en Electricidad
T.P. 68089 - 339269 STB
RH - 201609 - 481

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013627	
N. INV:	0081	SERVICIO: CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA
S.A.S

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		SIMITI - BOLIVAR
SERIE		
N. INV:	0066	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
RECIBIDO
06 JUL 2023

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013619	
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

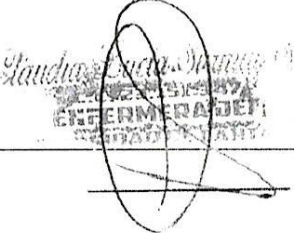
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero en Electricidad
C.C. 3176570931

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 3 - NUTRICION
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero de Mantenimiento
T.P. 3176570931
RH - 201609 - 481

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 3 - NUTRICION
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STB
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero de Mantenimiento
T.P. 3176570931
RH - 201609 - 481

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA DE PISO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 20 - LECTURA DE IMÁGENES
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA
S.A.S

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO	ACS-20B-YE	
SERIE	4231711220494	
N. INV:	0052	SERVICIO: CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

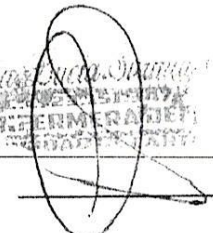
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STP
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
ELECTROMECAÁNICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES):
MARCA	DETECTO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO	ACS-20B-YE	
SERIE	4231711220198	
N. INV:	0056	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Staudrey Eusebio Sarmiento
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
S.A.S

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO		
SERIE		
N. INV:	0311	SERVICIO: CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269570
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero en Electromecánica
C.C. 3176570931
RH - 201609 - 481

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO	ASC-20B-YE	
SERIE	4231711220197	
N. INV:	0045	SERVICIO: CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza F...
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269570
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero Electromecánico
RECIBIDO
06 JUL 2023

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 3 - NUTRICION
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

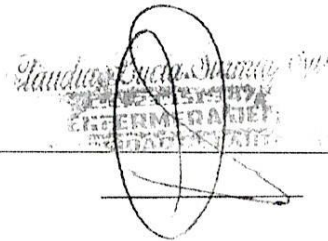
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Feroz
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S
BUCARAMANGA - SANTANDER

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560042-M22201680028	
N. INV:	0322	SERVICIO CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marcelo Rueda Santana
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
ELECTROMECÁNICA
ELECTRÓNICA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560054-M18C14770015	
N. INV:		SERVICIO CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda
INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S
BUCARAMANGA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0051	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL

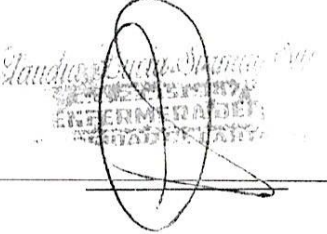
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481


RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0058	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0060	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S
BUCARAMANGA - SANTANDER

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0064	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A.S
BUCARAMANGA - SANTANDER

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Ferrer
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero Electromecánico
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	LENZ	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	PORTATIL	DE PADUA
SERIE	202205	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferraz
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
RECIBIDO
2023-07-06

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0070	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S
BUCARAMANGA - SANTANDER

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
MARCA	GENERAL ELECTRIC	
MODELO	LOGIQ F6	
SERIE	1317001080	
N. INV:	0047	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Verificar filtro de aire	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
Elber Andrés Plaza Fernández
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero en Electromecánica
C.E. 201609 - 481



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA

Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931

E-mail: ingelectrosas@gmail.com

Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	
MODELO	DP-2200PLUS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
SERIE	PD-3A004213	
N. INV:	0079	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	/
Verificar elementos electricos y/o electronicos	/
Verificar impresora	/
Verificar pantalla	/
Verificar filtro de aire	/
Realizar Prueba de seguridad electrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

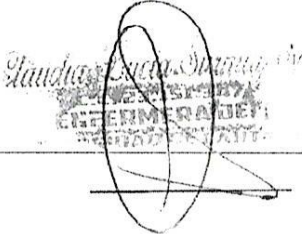
OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Sandra Lucía Suárez
INGENIERA DE
MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ACCLARIX LX8	
SERIE	560206-M17307720001	
N. INV:	0256	
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	COSULTORIO 16 - ECOGRAFÍAS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Verificar filtro de aire	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: *Elber Andrés Plaza Fernández*
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STB
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERO DE
MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEHEART R3	
SERIE	FK-84014468	
N. INV:		CONSULTORIO 18 - ELECTROCARDIOGRAMA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar gabinete, carcasa y aspecto físico en general	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Inspeccionar cables, electrodos, terminales, y demás elementos electricos y electronicos	✓
Limpiar y verificar el sistema de transporte de papel	✓
Verificar impresora o aguja marcadora (alineación, estado y funcionamiento), control térmico y presión mecánica, calibrar si es necesario	✓
Revisar carga de baterías	✓
Realizar prueba de señal (1mV) y compruebe su forma y amplitud	✓
Verificar con simulador de ECG señal de prueba	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA

Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931

E-mail: ingelectrosas@gmail.com

Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	200140134405	
N. INV:	0312	SERVICIO: CONSULTORIO 20 - LECTURA DE IMÁGENES
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manómetro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrer
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero Electromecánico
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA

Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931

E-mail: ingelectrosas@gmail.com

Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	200110140965	
N. INV:	0344	SERVICIO: CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STB
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero de Mantenimiento
T.P. 3176570931
RH - 201609 - 481

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221141645	
N. INV:	0057	SERVICIO: CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andres Rueda Santana
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
RECIBO



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA

Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931

E-mail: ingelectrosas@gmail.com

Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221065515	
N. INV:	0059	SERVICIO: CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrer
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero Electromecánico
Ingeniería de Mantenimiento

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221133215	
N. INV:	0063	SERVICIO: CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☐
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manómetro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

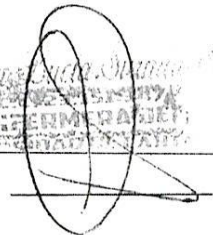
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


 Elber Andres Plaza Fernandez
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:


 Marco Aurelio Rueda Santana
 TECNICO EN MANTENIMIENTO
 REGISTRO NACIONAL

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221142185	
N. INV:	0077	SERVICIO: CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manómetro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

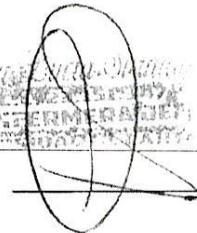
☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Fernandez
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
 C.E. ELECTROSAS
 C.E. ELECTROSAS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	200530075305	
N. INV:	0272	SERVICIO: CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA
S.A.S.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	450KL	
SERIE	200109075885	
N. INV:	0342	SERVICIO: CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Standish Erika Dora
Enfermera
RECIBIDA
2023 JUL 06
HORA 14:00



MARCO AURELIO RUEDA SANTANA

Calle 15 # 17-75 - Cel: 3176570931

E-mail: ingelectrosas@gmail.com

Bucaramanga - Santander

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180417120215	
N. INV:	0110	SERVICIO: CONSULTORIO 2
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marco Aurelio Rueda Santana
Ingeniero en Mantenimiento
RH - 201609 - 481

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	MASAJEADOR - 4B
MARCA/MODELO:	NEO SENS - AH8174
NÚMERO DE SERIE:	SN
INSTALADO EN:	CONSULTORIO No. 1 - FISIOTERAPIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- EMBOBINADO DE MOTOR - CABLE DE PODER COMPLETO - PULSADOR DE ENCENDIDO

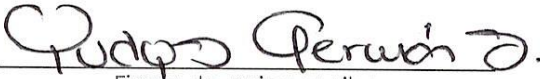
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 339269634
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	MASAJEADOR
MARCA/MODELO:	NEO SENS
NÚMERO DE SERIE:	SN
INSTALADO EN:	CONSULTORIO No. 1 - FISIOTERAPIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- EMBOBINADO DE MOTOR - TARJETA DE REGULACION DE VELOCIDAD - CABLE DE PODER

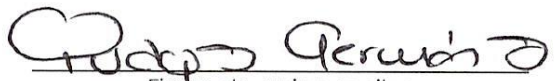
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 339269
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	MASAJEADOR - 1B
MARCA/MODELO:	HAND HELP - HM05-09
NÚMERO DE SERIE:	SN
INSTALADO EN:	CONSULTORIO No. 1 - FISIOTERAPIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

EMBOBINADO DE MOTOR - CABLE DE POTENCIA COMPLETO - TRANSISOR - POTENCIOMETRO

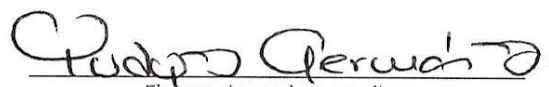
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339249
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe

REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	MASAJEADOR 2B
MARCA/MODELO:	HOMEDICS - HHP-285HJ-THP
NÚMERO DE SERIE:	3082382
INSTALADO EN:	CONSULTORIO No. 1 - FISIOTERAPIA

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- CABLE DE PODER, - ESCOBILLAS - PUENTE RECTIFICADOR - SOPORTE DE VIBRACION

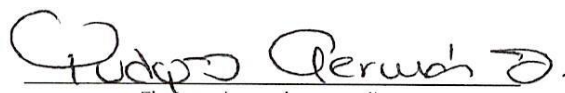
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68088 3392691
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

ESTERILIZACION

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
SIMITI – BOLIVAR



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	AUTOCLAVE A VAPOR
MARCA/MODELO:	PAFFOR - STEAM MEDICAL
NÚMERO DE SERIE:	08-10-2003-288
INSTALADO EN:	ESTERILIZACIÓN

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

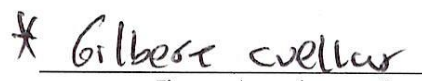
SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

SE ENCONTRO CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE PIÑONERÍA ROTO, SE RECOMIENDA EL DESMONTE DE LA PUERTA PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, PARA SU REPARACIÓN.

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269-111
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe



REPORTE DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO

No. _____

SEÑOR(ES):	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
FECHA:	SIMITÍ / JULIO 06 DE 2023
EQUIPO:	AUTOCLAVE A VAPOR
MARCA/MODELO:	PAFFOR
NÚMERO DE SERIE:	092418-025
INSTALADO EN:	ESTERILIZACIÓN

DAÑOS O FALLAS REPORTADAS

REPUESTOS INSTALADOS

- GENERADOR DE VAPOR COMPLETO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 4mm. - ACOPLER PARA UNION ENTRE GENERADOR Y CÁMARA. - ELECTROVÁLVULA DE DESCARGA A 220V - FILTRO PARA AGUA Y VAPOR DE 1/2 EN ACERO INOXIDABLE - RESISTENCIA TRIFASICA DE 12000W - VÁLVULA TERMOSTATICA - NIVEL DE AGUA ELECTRONICO - CHEQUE DE CALDERA

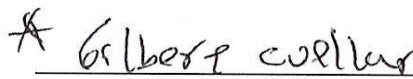
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SE PROCEDE A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. CAMBIO DE GENERADOR, VERIFICACION DE PRESIONES Y TEMPERATURAS, LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE VALVULAS Y CHEQUES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL.

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ FUNCIONAL ☐ EN ALMACEN ☐ FUERA DE SERVICIO


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 339269
Firma de quien entrega
RH - 201609 - 481


Firma de quien recibe

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

RAYOS X

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X PORTATIL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	SIEMENS	
MODELO	POLYMOVIL 10	
SERIE	01901-516	
N. INV:		SERVICIO RAYOS X
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, columna de soporte y frenos magneticos	✓
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos	✓
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc.	✓
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores	✓
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control	✓
Verificar la exposición y actuación de circuitos de protección	✓
Verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX)	✓
Verificar la compensación de voltaje de línea	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

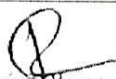
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional

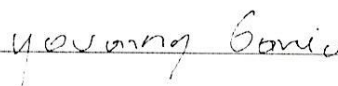
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 SFD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Yenny Gonia

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X CONVENCIONAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	AMERICOMP	
MODELO	AM2	
SERIE	AB59106-15	
N. INV:	TUBO TOSHIBA 5E0123	SERVICIO RAYOS X
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, columna de soporte y frenos magneticos	☒
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos	☒
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc.	☒
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores	☒
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control	☒
Verificar la exposición y actuación de circuitos de protección	☒
Verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX)	☒
Verificar la compensación de voltaje de línea	☒
Verificar el funcionamiento del equipo	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Yovanny Gonia

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAMOGRAFO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	GENORAY	
MODELO	MX-600	
SERIE	GMA-052802-50318	
N. INV:	SI	SERVICIO SALA DE MAMOGRAFIA
CIUDAD Y FECHA:	06 JUL. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa de mesa, equipo y panel de control.	✓
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos.	✓
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc.	✓
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano, alarmas e indicadores.	✓
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control.	✓
Verificar lampara de Colimación.	✓
Realizar pruebas de seguridad.	✓
Verificar placas, brazo, palanba y botones de operación.	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Yammy Goria