

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI / BOLIVAR

2023

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

LABORATORIO CLINICO

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROSCOPIO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	LABOMED	
MODELO	LX 400	
SERIE	140665600	
N. INV:	.0102	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Limpiar, lubricar y ajustar el sistema porta lamina	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

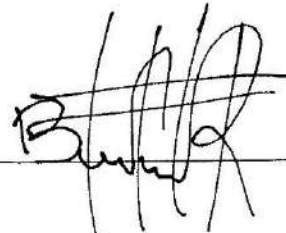

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROSCOPIO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	LABOMED	
MODELO	LX 400	
SERIE	140665572	
N. INV:	100	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa del equipo	
Inspeccionar el equipo en forma externa	
Efectuar limpieza integral interna del equipo	
Limpiar sistema optico	
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	
Verificar la operación de todos los indicadores	
Limpiar, lubricar y ajustar el sistema porta lamina	
Realizar Prueba de seguridad electrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☐
☒

Funcional

Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Se encuentra fuera de servicio, sin carro de pruebas, se recomienda dar de baja.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

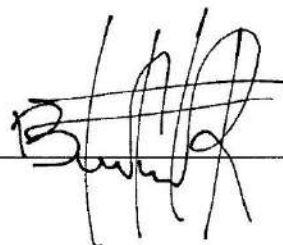

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BAÑO SEROLOGICO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	MEMMERT	
MODELO	0	
SERIE	DIN12876-3-K1	
N. INV:	.0086	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	09 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos	✓
Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes)	✓
Verificar control automático de temperatura	✓
Verificar temperatura con termómetro de mmHg	✓
Inspeccionar lámparas de señalización	✓
Comprobar tiempo de alcance de temperatura	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BOECO	
MODELO	OS20	
SERIE	1407-0206	
N. INV:	.0085	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	/
Efectuar limpieza integral interna del equipo	/
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	/
Verificar perillas de control y señalizaciones	/
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	/
Verificar medidor de tiempo	/
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	/
Realizar Prueba de seguridad electrica	/
Verificar el funcionamiento	/


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

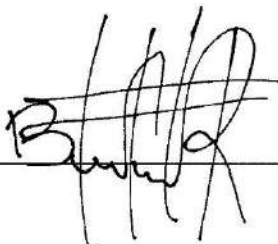

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR HEMATOLÓGICO BASCULANTE	SEÑOR(ES):
MARCA	INDULAB	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	2007	
SERIE		
N. INV:	0424	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	/
Efectuar limpieza integral interna del equipo	/
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	/
Verificar perillas de control y señalizaciones	/
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	/
Verificar medidor de tiempo	/
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	/
Realizar Prueba de seguridad electrica	/
Verificar el funcionamiento	/


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

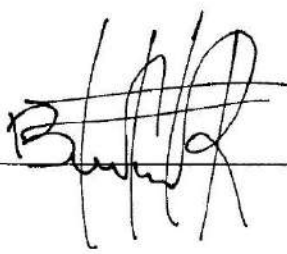

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AGITADOR DE MAZZINI	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	OPTIMA	
MODELO	DSR-2100P	
SERIE	13020096	
N. INV:	.0090	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques,	/
Efectuar limpieza integral interna del equipo	/
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	/
Verificar perillas de control y señalizaciones	/
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario	/
Verificar medidor de tiempo	/
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	/
Realizar Prueba de seguridad electrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROCENTRIFUGA	SEÑOR(ES):
MARCA	BOECO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	HC240	
SERIE	.0000120	
N. INV:	.0092	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	☒
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	☒
Verificar perillas de control y señalizaciones	☒
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	☒
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	☒
Verificar el balance del plato con carga	☒
Verificar medidor de tiempo	☒
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	☒
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MICROCENTRIFUGA	SEÑOR(ES):
MARCA	CLAY ADAMS	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	COMPACT II	
SERIE	5160017	
N. INV:	0087	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	✓
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	✓
Verificar perillas de control y señalizaciones	✓
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	✓
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	✓
Verificar el balance del plato con carga	✓
Verificar medidor de tiempo	✓
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	✓
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	CENTRIFUGA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CLAY ADAMS	
MODELO	COMPACT II	
SERIE	5160019	
N. INV:	.0103	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	☒
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	☒
Verificar perillas de control y señalizaciones	☒
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	☒
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	☒
Verificar el balance del plato con carga	☒
Verificar medidor de tiempo	☒
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	☒
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

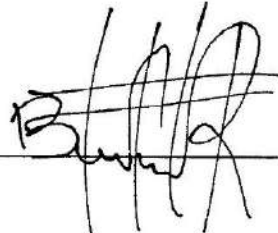

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SEROFUGA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	CLAY ADAMS	
MODELO	2002	
SERIE	5030027	
N. INV:	.0088	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	09 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	
Revisar partes y accesorios: soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.	
Revisar conexiones eléctricas, internas y externas	
Verificar perillas de control y señalizaciones	
Revisar el motor y sus componentes (carbones, rodamientos, eje, acoplamiento, etc.).	
Cambiar carbones y lubricar si es necesario	
Verificar el balance del plato con carga	
Verificar medidor de tiempo	
Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango	
Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad	
Realizar Prueba de seguridad electrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Equipo fuera de servicio, plato de carga partido, en proceso de mantenimiento correctivo.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RM - 201609 - 481

RECIBE:

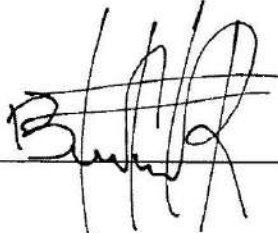

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	HORNO DE CALOR SECO	SEÑOR(ES):
MARCA	DKASA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		
SERIE	KWS1523J-H12	
N. INV:	0099	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	LABORATORIOCLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.)	✓
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador)	✓
Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores	✓
Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del	✓
Verificar protecciones y alarmas (sobretensión, no circulación del aire, etc.)	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

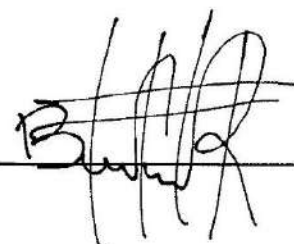

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	HORNO DE CALOR SECO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	MEMMERT	
MODELO	30-705	
SERIE	60529	
N. INV:	0105	SERVICIO: LABORATORIOCLINICO
CIUDADY FECHA:	09 AGO, 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	
Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.)	
Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador)	
Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores	
Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del	
Verificar protecciones y alarmas (sobretensión, no circulación del aire, etc.)	
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	
Verificar el funcionamiento	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☐ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Equipo fuera de servicio por daño en perilla de regulación.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

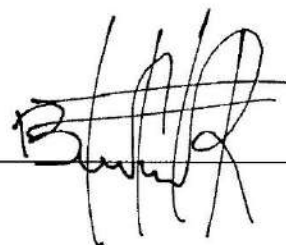

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO


EQUIPO	ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	I15	
SERIE	DM-005549	
N. INV:	.0094	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

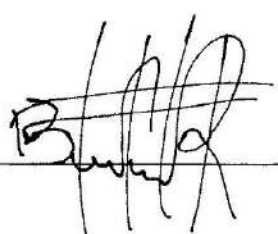RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR QUIMICA SANGUINEA	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	BIOSYSTEMS		
MODELO	BTS-360		
SERIE	801757982		
N. INV:	.0084	SERVICIO:	Laboratorio Clinico
FECHA:	09 AGO. 2023		

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesar	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR: *Elber Andrés Plaza Fernández*
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *[Signature]*

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ANALIZADOR QUIMICA SANGUINEA	CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	MINDRAY		
MODELO	BS-240PRO		
SERIE	BC7-26002166	SERVICIO:	Laboratorio Clinico
N. INV:	0421		
FECHA:	09 AGO. 2023		


Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa del equipo	/
Inspeccionar el equipo en forma externa	/
Efectuar limpieza integral interna del equipo	/
Limpiar sistema optico	/
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	/
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesar	/
Revisar bomba peristaltica	/
Revisar impresora	/
Revisar mangueras y drenaje	/
Realizar Prueba de seguridad electrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES: _____

REALIZADO POR: 
Elber Andrés Plaza Fierpantón
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

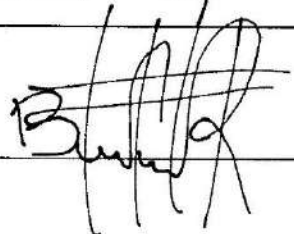RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE HEMATOLOGIA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI / SUR DE BOLIVAR
MODELO	BC-5390	
SERIE	TM-23000574	
N. INV:	0372	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	09 ABO. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	✓
Revisar bomba peristaltica	✓
Revisar impresora	✓
Revisar mangueras y drenaje	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	INCUBADORA MICRO ELISA	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	STAT FAX-2200	
MODELO	AWARENESS TECHNOLOGY INC	
SERIE	18956	
N. INV:	.0097	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Verificar la estabilidad de la lámpara.	☒
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	☒
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	☒
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	☒
Verificación de valibración por filtros.	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LECTOR DE MICROPLACAS	SEÑOR(ES): E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MARCA	MINDRAY	
MODELO	MR-96A	
SERIE	83108229	
N. INV:	.0095	SERVICIO: LABORATORIO CLINICO
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Verificar la estabilidad de la lámpara.	✓
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	✓
Limpiar el mecanismo de avance de la placa.	✓
Verificar la alineación de cada pozo con los sistemas emisores y detectores de luz.	✓
Verificación de valibración por filtros.	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RM - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	MW-12A	
SERIE	77105152	
N. INV:	.0098	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Desensamblar y limpiar los conductos y conectores.	☒
Verificar la integridad de los componentes mecánicos.	☒
Confirmar la integridad del conector eléctrico y el cable de interconexión	☒
Verificar calibración del sistema.	☒
Lubricación general.	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO: 
Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: 

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	UROMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	SD STANDARD DIAGNOSTIC INC	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
MODELO	UROMETER 120	PADUA DE SIMITI
SERIE	120160428023	
N. INV:	.0101	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Verificar la estabilidad de la lámpara.	☒
Limpiar los sistemas ópticos de los detectores y los sistemas de iluminación.	☒
Verificación de calibración.	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica y funcionamiento.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DETECTOR DE INMUNOFLUORECENCIA	SEÑOR(ES):
MARCA	WONDFO	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	FS-113	
SERIE	FS1132111211184	
N. INV:	0284	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	09 AGO. 2023	LABORATORIO CLINICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar las partes mecánicas del equipo, lubrique y ajuste si es necesario	☒
Revisar impresora	☒
Revisar mangueras y drenaje	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

INGENIERO:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

[Signature]

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

RAYOS X

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MAMOGRAFO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	GENORAY	
ANTONIO MODELO	MX-600	
SERIE	GMA-052802-50318	
N. INV:	0114/0115	SERVICIO SALA DE MAMOGRAFIA
CIUDAD Y FECHA:	11 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa de mesa, equipo y panel de control.	☒
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos.	☒
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc.	☒
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano, alarmas e indicadores.	☒
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control.	☒
Verificar lampara de Colimación.	☒
Realizar pruebas de seguridad.	☒
Verificar placas, brazo, palanba y botones de operación.	☒
Verificar el funcionamiento del equipo	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


 Elber Andrés Plaza Ferrnandez
 Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:


 Yovanny Gonia

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X CONVENCIONAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	AMERICOMP	
MODELO	AM2	
SERIE	AB59106-15	
N. INV:	TUBO TOSHIBA 5E0123	SERVICIO RAYOS X
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, columna de soporte y frenos magnéticos	✓
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos	✓
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc.	✓
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores	✓
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control	✓
Verificar la exposición y actuación de circuitos de protección	✓
Verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX)	✓
Verificar la compensación de voltaje de línea	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


- ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

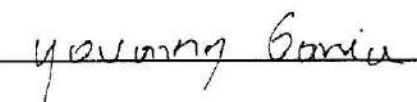

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	RAYOS X PORTATIL	SEÑOR(ES):
MARCA	SIEMENS	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	POLYMOVIL 10	DE PADUA
SERIE	01901-516	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	RAYOS X

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa de mesa, panel de control, bucky de pared, bucky de mesa, colimador, columna de soporte y frenos magneticos	☒
Verificar estado y funcionamiento de partes mecánicas accesibles: rodamientos, rieles, cadena, cable acerado y contrapesos	☒
Verificar estado de elementos eléctricos externos: cables de alta tensión, conectores, fusibles, etc	☒
Verificar estado y funcionamiento de perillas selectoras e interruptores de mano (handswitch), alarmas e indicadores	☒
Verificar estado y funcionamiento de frenos magnéticos e interruptores de control	☒
Verificar la exposición y actuación de circuitos de protección	☒
Verificar la preparación (rotación de ánodo del tubo de RX)	☒
Verificar la compensación de voltaje de línea	☒
Verificar el funcionamiento del equipo	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Yessany Gonia



**INGENIERÍA
ELECTROMECAÁNICA S.A.S.**

Electromedicina - Mantenimiento
Equipos Médicos - Autoclaves - Odontológicos
Aire Acondicionado Compresores
Montajes - Construcciones

**REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA**

ESTERILIZACION

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	PAFFOR	
MODELO	STEAM MEDICAL	
SERIE	092418-025	
N. INV:	007	SERVICIO: ESTERILIZACION
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	✓
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	✓
Revisar estado del empaque de la puerta	✓
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	✓
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada (válvula múltiple, tuberías, etc.)	✓
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	✓
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	✓
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	✓
Verificar estado de temporizador	✓
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	✓
Verificar estado de válvula de seguridad	✓
Verificar el funcionamiento del equipo	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:



Funcional



Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnador
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Luis Fidel Ortiz

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	AUTOCLAVE A VAPOR	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MARCA	PAFFOR - SM	
MODELO	VAC-150L	
SERIE	.08-10-2003-288	
N. INV:	008	SERVICIO: ESTERILIZACION
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	
Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada	
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo	
Revisar estado del empaque de la puerta	
Revisar sistema eléctrico y accesorios (cable, contactores, conexiones, perillas de control, etc.)	
Verificar estado de sistema de llenado de agua destilada (válvula múltiple, tuberías, etc.)	
Verificar sistema de señalización de proceso de esterilización	
Revisar sistema de alta presión (tubería, trampa de vapor, etc.)	
Verificar estado de manómetros, cambiar si es necesario	
Verificar estado de temporizador	
Verificar sistema mecánico de cierre de puerta, lubricar si es necesario	
Verificar estado de válvula de seguridad	
Verificar el funcionamiento del equipo	

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☐ Funcional
☒ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Presenta daño en puerta, se recomienda realizar mantenimiento correctivo.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

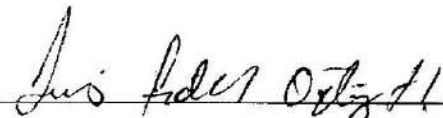

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

HOSPITALIZACIÓN

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR AISLADOS
MARCA	MINDRAY	
MODELO	SK600II	
SERIE	SK00304954	
N. INV:		
CUIDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral del equipo	/
Verificar cable de poder	/
Verificar seguros de la puerta	/
Verificar elementos de sujecion al atril	/
Verificar funcionamiento del motor	/
Verificar sistemas electricos y mecanicos	/
Verificar funcionamiento general del equipo.	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	D122EGAF071	
N. INV:	0006	HOSPITALIZACION SALA 3
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se encontró en SALA DE HOMBRES 2

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	D122EGBL007	
N. INV:	0027	HOSPITALIZACION SALA 4
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se encontró en sala de Urgencias – rehidratación

Elber Andrés Plaza Fernández
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *Sindy M Triviño*

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	MINDRAY	
MODELO	BENEFUSION VP1	
SERIE	SK00306336	
N. INV:	0210	HOSPITALIZACION SALA 4
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral del equipo	☒
Verificar cable de poder	☒
Verificar seguros de la puerta	☒
Verificar elementos de sujecion al atril	☒
Verificar funcionamiento del motor	☒
Verificar sistemas electricos y mecanicos	☒
Verificar funcionamiento general del equipo.	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:


☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

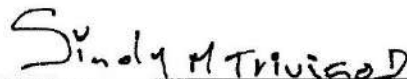
Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BOMBA DE INFUSION	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR SALA HOSPITALIZACION MUJERES 1
MARCA	MEDIFUSION	
MODELO	D1-2200	
SERIE	D122EGBL008	
N. INV:	0048	
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral del equipo	✓
Verificar cable de poder	✓
Verificar seguros de la puerta	✓
Verificar elementos de sujecion al atril	✓
Verificar funcionamiento del motor	✓
Verificar sistemas electricos y mecanicos	✓
Verificar funcionamiento general del equipo.	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DESFIBRILADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - SIMITI
MODELO	BENEHEART D3	
SERIE	EZ-03035136	
N. INV:	211	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa (perillas, paletas, terminales, medidores. Etc.)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar cable de alimentación, conector, portafusible, conexión a tierra y demás componentes eléctricos/electrónicos	☒
Revisar baterías e indicador de carga	☒
Verificar circuito de descarga interna	☒
Verificar acumuladores de carga y compruebe su descarga	☒
Verificar tiempo de carga y descarga. Realizar disparos de prueba	☒
Verificar alarmas (límite inferior, superior y de papel)	☒
Verificar con simulador de paciente la descarga sincronizada	☒
Efectuar prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

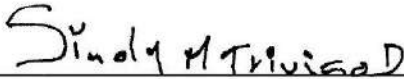
Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0158	
N. INV:	215	HOSPITALIZACION SALA 4
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560042-M22609760021	
N. INV:	347	SERVICIO ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒
☐

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
 T.P. 68089 - 339269 STD
 RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	XHZ-90L	
SERIE	A46BC0003009	
N. INV:	420	SERVICIO SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA 2
CIUDAD Y FECHA:	11 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	✓
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	✓
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo, giratorio, articulaciones, etc.	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	✓
Lubricar partes móviles	✓
Verificar operatividad de sistema mecánico	✓
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES):
MARCA	NINGBO DAVID	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	XHZ-90L	DE PADUA
SERIE	A46BC0003013	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	419	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA 2

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	☒
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	☒
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo, giratorio, articulaciones, etc.	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	☒
Lubricar partes móviles	☒
Verificar operatividad de sistema mecánico	☒
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional


Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

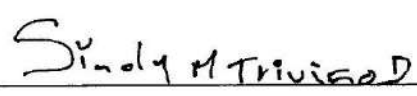
Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	NINGBO DAVID	
MODELO	XHZ-90L	
SERIE	46AHZG05001	
N. INV:		SERVICIO SALA HOSPITALIZACION MUJERES 1
CIUDAD Y FECHA:	11 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza de las superficies ópticas (lentes, filtros, vidrios y reflectores)	/
Efectuar limpieza integral externa del resto del equipo	/
Revisar el estado de las partes mecánicas : plataforma, brazo, giratorio, articulaciones, etc.	/
Efectuar limpieza integral interna del equipo	/
Revisar sistema eléctrico (Transformadores, conductores, conectores), cambiar elementos con signos de deterioro	/
Lubricar partes móviles	/
Verificar operatividad de sistema mecánico	/
Verificar el funcionamiento de las luminarias, reemplazar si es	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrer
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD00132	
N. INV:	233	
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO, 2023	 AISLADOS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se realiza el traslado de este equipo a Remisiones.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0149	
N. INV:	220	HOSPITALIZACION SALA 1
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0157	
N. INV:	222	HOSPITALIZACION SALA 1
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Trujillo

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0164	
N. INV:	208	HOSPITALIZACION SALA 2
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0159	
N. INV:	200	HOSPITALIZACION SALA 4
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	/
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	/
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	/
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	/
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	/
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	/
Verificar fugas y lecturas de presión	/
Verificar la lectura de temperatura	/
Verificar lectura de pulso y oximetría	/
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	/
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	/
Verificar el funcionamiento	/

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0163	
N. INV:	217	HOSPITALIZACION SALA 2
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0157	
N. INV:	198	HOSPITALIZACION SALA 3
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	DRAGER	
MODELO	MS32997	
SERIE	S2SNF0162	
N. INV:	206	HOSPITALIZACION SALA 3
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviado

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE -120	
SERIE	J3300QD02782	
N. INV:	195	SALA DE HOSPITALIZACION HOMBRES 2
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	ADVANCED	
MODELO	PM200M	
SERIE	Q068A027646	
N. INV:	257	SALA DE HOSPITALIZACION HOMBRES 3
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández

Ing. Mantenimiento

T.P. 68089 - 339269 STU

RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE -120	
SERIE	J3300QD02809	
N. INV:	225	SALA DE HOSPITALIZACION MUJERES 2
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	NEBULIZADOR	SEÑOR(ES):
MARCA	DEVILBISS	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI
MODELO	PULMOAIDE - 5650D	
SERIE	D7001383	
N. INV:	193	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	HOSPITALIZACION SALA 4

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	☒
Inspeccionar valvulas unidireccionales	☒
Revisar filtro silenciador, cambiar si es necesario	☒
Verificar flujo maximo (lts/min)	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio


OBSERVACIONES:

Se encontró en SALA HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA.

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

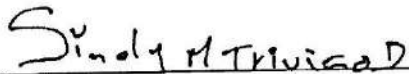
Sindy M Triviada

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	ADVANCED	
MODELO	PM200M	
SERIE	Q068A027531	
N. INV:	264	SALA DE HOSPITALIZACION MUJERES 2
CIUDAD Y FECHA:	11 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Se encontró sin brazaletes de un vía.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	ADVANCE -120	
SERIE	J3000QD00124	
N. INV:	246	SALA DE HOSPITALIZACION MUJERES 3
CIUDAD Y FECHA:	11 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable dealimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD00119	
N. INV:	234	SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	☒
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	☒
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	☒
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	☒
Verificar fugas y lecturas de presión	☒
Verificar la lectura de temperatura	☒
Verificar lectura de pulso y oximetría	☒
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	☒
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	CREATIVE MEDICAL	
MODELO	DELUXE-100	
SERIE	J3000QD0099	
N. INV:	196	SALA DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA 1
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.)	✓
Verificar el funcionamiento del selector de derivaciones	✓
Verificar el funcionamiento del selector de amplitud de ECG	✓
Verificar el brillo y el enfoque del trazo	✓
Verificar fugas y lecturas de presión	✓
Verificar la lectura de temperatura	✓
Verificar lectura de pulso y oximetría	✓
Verificar el sistema de alarmas en cada módulo	✓
Realizar Prueba de seguridad eléctrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Presenta daño en tapa, se encontró en SALA HOSPITALIZACIÓN MUJERES 2

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	SUCCIONADOR QUIRURGICO	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	THOMAS	
MODELO	MEDI-PUMP	
SERIE	61600012532	
N. INV:	.0010	SERVICIO ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	✓
Inspeccionar partes mecanicas (cojinetes, rodamientos, asientos de soportes, aspas etc.)	✓
Inspeccionar valvulas unidireccionales	✓
Revisar filtro bacteriologico y filtro silenciador, cambiar si es necesario	✓
Revisar sellado de nivel de liquido	✓
Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario	✓
Inspeccionar fugas en el sistema de vacio (mangueras, frascos, empaques y acoples)	✓
Verificar flujo maximo (lts/min)	✓
Verificar rango de vacio (seg/mmHg)	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Suministro e instalación de filtro hidrofóbico.

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimientos
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Sindy M Triviño

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	PEDESTAL	
SERIE	200605111195	
N. INV:	.0277	SERVICIO: ESTACION ENFERMERIA HOSPITALIZACION
CIUDAD Y FECHA:	11 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

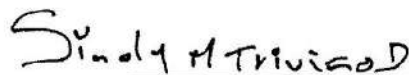
Sindy M Triviño

REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DADOS DE BAJA

CONSULTA EXTERNA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA

SIMITI – BOLIVAR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO	450KL	
SERIE	4500013753	
N. INV:	0053	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Staudia Rueda Santana
ENFERMERA DE
BUCAMANGA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO	450KL	
SERIE	4500013628	
N. INV:	0055	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STU
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Claudio Andrés Ruíz
INGENIERO DE
MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	TENSO MED	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		SIMITI - BOLIVAR
SERIE		
N. INV:	0300	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudia Lucia Suarez
ENFERMERA DE
CONSULTORIO 6

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO	450KL	
SERIE	4500013757	
N. INV:	0062	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA S.A.S
BUCARAMANGA - SANTANDER

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO	450KL	
SERIE	4500013618	
N. INV:		SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudia Lucia Domínguez
ENFERMERA DE
UNIDAD DE ATENCIÓN

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MODELO	450KL	
SERIE	4500013627	
N. INV:	0081	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudia Rueda Santana
ENFERMERA DEFI
CIUDAD DE BUENAVISTA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES):
MARCA	HEALTH O METER	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO		SIMITI - BOLIVAR
SERIE		
N. INV:	0066	SERVICIO:
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO	450KL	
SERIE	4500013619	
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA JEF.
CONSULTORIO 9

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 3 - NUTRICION
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudia Lucia Sarmiento
ENFERMERA DE
SENA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA CON TALLÍMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO		
SERIE		
N. INV:	1747	SERVICIO: CONSULTORIO 3 - NUTRICION
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudy Lucía Sarmiento
ENFERMERA DE
CONSULTORIO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA DE PISO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	HEALTH O METER	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 20 - LECTURA DE IMÁGENES
CIUDAD Y FECHA:	7 0 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA OSPINA
ENFERMERA DE
RADIOLOGIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO	ACS-20B-YE	
SERIE	4231711220494	
N. INV:	0052	SERVICIO: CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA BUCAN
ENFERMERA DE
GUARDIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO	ACS-20B-YE	
SERIE	4231711220198	
N. INV:	0056	SERVICIO: CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
BUCARAMANGA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO		
SERIE		
N. INV:	0311	SERVICIO: CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO
CIUDAD Y FECHA:	70 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
INGENIERO DE ELECTRICIDAD

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO	ASC-20B-YE	
SERIE	4231711220197	
N. INV:	0045	SERVICIO: CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒


ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

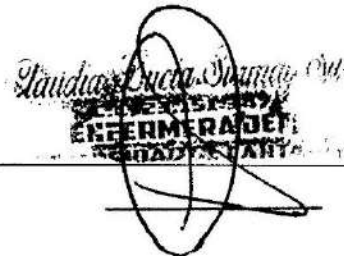
MARCO AURELIO RUEDA SANTANA
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
BOGOTÁ - COLOMBIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	BALANZA PEDIATRICA	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI - BOLIVAR
MARCA	DETECTO	
MODELO		
SERIE		
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 3 - NUTRICION
CIUDAD Y FECHA:	10 A60. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma), si aplica	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda	☒
Lubricar el sistema mecánico	☒
Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste	☒
Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Staudios Rueda Santana
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
RECIBIDO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560042-M22201680028	
N. INV:	0322	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	7 0 ABO. 2023	CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

David Rueda Santana
ENFERMERA DE
RECIBO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	DOPPLE FETAL	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	EDAN	
MODELO	SONOTRAX Basic A	
SERIE	560054-M18C14770015	
N. INV:		SERVICIO CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa	✓
Inspeccionar externamente (cables, conector, transductor, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Verificar elementos eléctricos y/o electrónicos	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fierman
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

Marco Aurelio Rueda Santana
RECIBE: INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA S.A.S

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0051	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

Laudina Elena Ospina
ENFERMERA DE
RECIBO
RECIBE: _____

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0058	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Ferrnández
Ing. Mantenimiento

REALIZADO POR: T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

David... Rueda...
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA
S.A.S

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0060	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Standley Ducha Dary
ENFERMERA DE
BUCAMANGA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0064	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andres Plaza Fernandez
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA S.A.S

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI-BOLIVAR
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	65 777	
SERIE		
N. INV:		SERVICIO CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
REALIZADO POR: **Ing. Mantenimiento**
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

Andrés Rueda Santana
RECIBE: **ENFERMERA DE**
Andrés Rueda Santana

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	LENZ	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	PORTATIL	DE PADUA
SERIE	202205	SIMITI-BOLIVAR
N. INV:		SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa del equipo	☒
Inspeccionar el equipo en forma externa	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Limpiar sistema optico	☒
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	☒
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	☒
Verificar la operación de todos los indicadores	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: *Elber Andrés Plaza Fernández*
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: *Staudius Rueda Santana*
ENFERMERA DE
RECIBO DE

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	SEÑOR(ES):
MARCA	WELCH ALLYN	HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	65 777	DE PADUA
SERIE		SIMITI-BOLIVAR
N. INV:	0070	SERVICIO
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓
Efectuar limpieza integral externa del equipo	✓
Inspeccionar el equipo en forma externa	✓
Efectuar limpieza integral interna del equipo	✓
Limpiar sistema optico	✓
Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos	✓
Verificar el rango de operación de los controles de iluminación	✓
Verificar la operación de todos los indicadores	✓
Realizar Prueba de seguridad electrica	✓
Verificar el funcionamiento	✓

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE: Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
UNIDAD DE CUIDADO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	GENERAL ELECTRIC	
MODELO	LOGIQ F6	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
SERIE	1317001080	
N. INV:	0047	
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Verificar filtro de aire	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

ENFERMERA DE
RECIBE: Enfermera de

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	DP-2200PLUS	
SERIE	PD-3A004213	
N. INV:	0079	CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Verificar filtro de aire	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernando

REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA S.A.S
BOGOTÁ

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ECOGRAFO CON IMPRESORA	SEÑOR(ES):
MARCA	EDAN	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
MODELO	ACCLARIX LX8	
SERIE	560206-M17307720001	
N. INV:	0256	COSULTORIO 16 - ECOGRAFÍAS
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa y interna del equipo	☒
Inspeccionar externamente (cables, conectores, transductores, carcasa, dispositivos de control y presentadores)	☒
Verificar elementos electricos y/o electronicos	☒
Verificar impresora	☒
Verificar pantalla	☒
Verificar filtro de aire	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Elber Andrés Plaza Fernández
REALIZADO POR: Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

Laudina Rueda Santana
RECIBE: **ENFERMERA DE
ECOGRAFÍAS**

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO	SEÑOR(ES):
MARCA	MINDRAY	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO
MODELO	BENEHEART R3	DE PADUA - SIMITI-BOLIVAR
SERIE	FK-84014468	
N. INV:		CONSULTORIO 18 -
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	ELECTROCARDIOGRAMA

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral externa	☒
Inspeccionar gabinete, carcasa y aspecto físico en general	☒
Efectuar limpieza integral interna del equipo	☒
Inspeccionar cables, electrodos, terminales, y demás elementos electricos y electronicos	☒
Limpiar y verificar el sistema de transporte de papel	☒
Verificar impresora o aguja marcadora (alineación, estado y funcionamiento), control térmico y presión mecánica, calibrar si es necesario	☒
Revisar carga de baterías	☒
Realizar prueba de señal (1mV) y compruebe su forma y amplitud	☒
Verificar con simulador de ECG señal de prueba	☒
Realizar Prueba de seguridad electrica	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Dúrcal
ENFERMERA DE
CUIDADO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	200140134405	
N. INV:	0312	SERVICIO: CONSULTORIO 20 - LECTURA DE IMÁGENES
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manómetro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Dúrcal Durán
ENFERMERA DE
REGISTRO Y ATENCIÓN

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	200110140965	
N. INV:	0344	SERVICIO: CONSULTORIO 4 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	70 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernando
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


CLAUDIA LUCIA SUAREZ
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221141645	
N. INV:		SERVICIO: CONSULTORIO 5 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	7 0 AGO, 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manómetro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manómetro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudimar Lucía Osorio
ENFERMERA DE
UNIDAD CARI

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221065515	
N. INV:	0059	SERVICIO: CONSULTORIO 6 - MEDICINA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	10 ABO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:


Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:


Marcia Rueda Santana
ENFERMERA DE
FARMACIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221133215	
N. INV:	0063	SERVICIO: CONSULTORIO 8 - PEDIATRICO
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudia Rueda Santana
ENFERMERA DE
RECIBO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180221142185	
N. INV:	0077	SERVICIO: CONSULTORIO 10 - GINECOLOGIA
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO, 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazalete, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Andrés Rueda Santana
ENFERMERA DE
CUIDADO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	200530075305	
N. INV:	0272	SERVICIO: CONSULTORIO 11 - CIRUGIA GENERAL
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierro
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudia Lucia Suarez
ENFERMERA DE
CIUDAD DE SAN

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	450KL	
SERIE	200109075885	
N. INV:	0342	SERVICIO: CONSULTORIO 9 - MEDICINA INTERNA
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO, 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: ☒ Funcional
☐ Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fernández
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Staudia Lucia Suarez
ENFERMERA DE
URGENCIAS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO

EQUIPO	TENSIOMETRO	SEÑOR(ES): ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA SIMITI
MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	767	
SERIE	180417120215	
N. INV:	0110	SERVICIO: CONSULTORIO 2
CIUDAD Y FECHA:	10 AGO. 2023	

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	☒
Efectuar limpieza integral	☒
Inspeccionar externamente (Brazaletes, pera, manometro)	☒
Efectuar chequeo de fugas.	☒
Verificar lecturas en el manometro.	☒
Verificar el funcionamiento	☒

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO:

☒

Funcional

Fuera de servicio

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:

Elber Andrés Plaza Fierman
Ing. Mantenimiento
T.P. 68089 - 339269 STD
RH - 201609 - 481

RECIBE:

Laudia Lucia Suarez
ENFERMERA DE
UNIDAD DE CUIDADO